

Welkom bij de Installatie van de

Thermometer

THE BOX

THUISMETING VOOR HARTPATIENTEN





Open nu de Withings app op uw telefoon of tablet.

- Van het LUMC Hart Long Centrum heeft u de thermometer gekregen.
- Met de thermometer kunt u gemakkelijk een temperatuur meten.
- In de volgende stappen ziet u hoe u de thermometer kunt installeren.

Eerder heeft u al ingelogd in de Withings app die u nodig heeft om de thermometer te installeren en te gebruiken.




Lees goed de volgende stappen door. Komt u er daarna niet uit met de installatie, neem dan contact op met Team Box Support

Selecteer rechts bovenin  
Om een apparaat te koppelen

Selecteer **Installeer een apparaat**

Selecteer **Thermo**

Selecteer **Installeren**

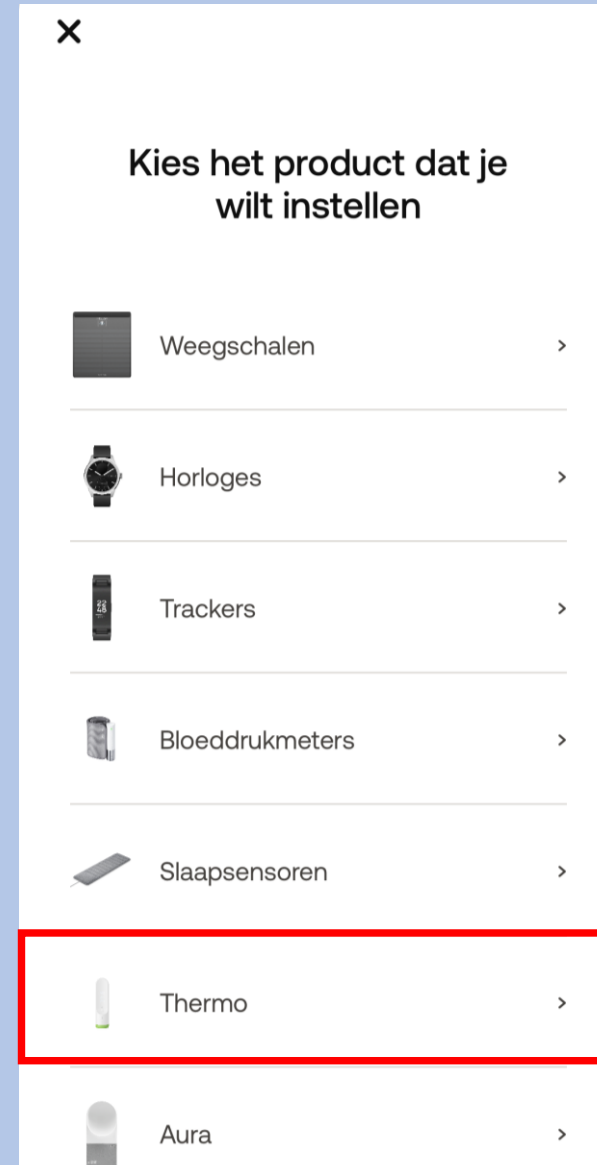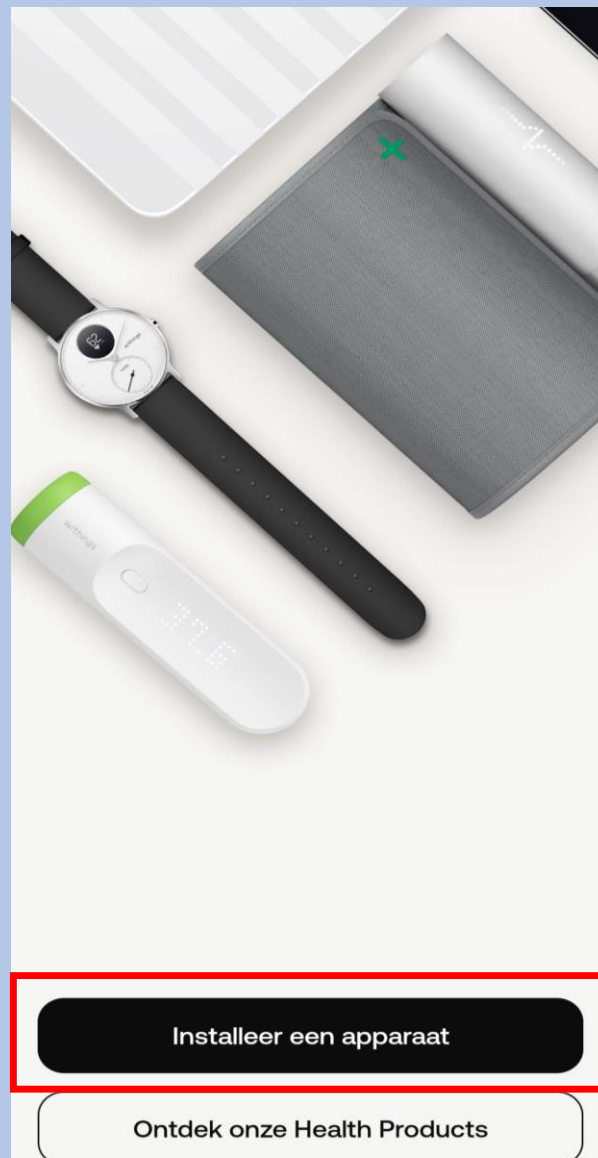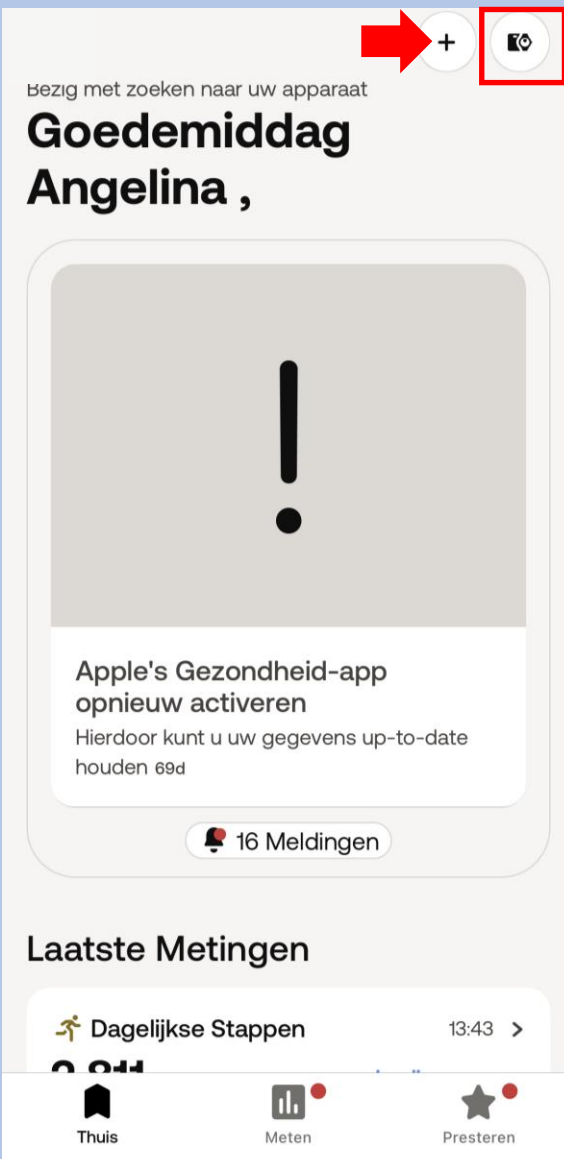

Houd de knop van de thermometer indrukt tot u SETUP ziet verschijnen op de thermometer en selecteer op de app **volgende**

Selecteer **Volgende**


Selecteer **Pair**

Selecteer **Koppel**



Aan de slag!

Houd de knop ingedrukt tot er "SETUP" op het scherm verschijnt.

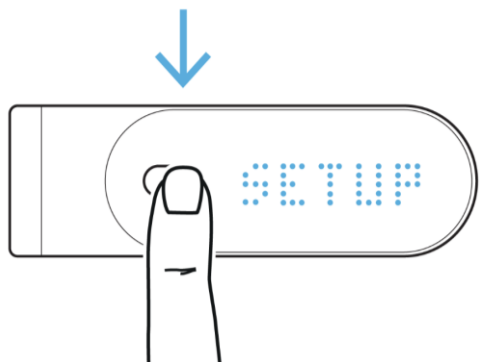

Volgende

Annuleren

Thermometer gedetecteerd



Volgende

Annuleren

Koppel uw Thermo met uw telefoon



Pair

Annuleren

Bluetooth-koppelingsverzoek

'Thermo 16' wil met je iPhone koppelen.

Annuleer

Koppel



Selecteer **Volgende**

Annuleren

Verbonden met je thermometer



Volgende

Selecteer Ik heb geen Wi-Fi of kies voor uw eigen WiFi netwerk en over uw wachtwoord in, dit is uw eigen keus.

Annuleren



Wil je verbinding maken met Wi-Fi-netwerk 'TMNL-A404E1'?

Eenmaal aangesloten kan Thermo uw gegevens automatisch synchroniseren

WACHTWOORD

Tekst toevoegen



Verbinding maken met

Ander netwerk selecteren

Ik heb geen Wi-Fi

Selecteer **Ok** als er voor Bluetooth gekozen is

Annuleren



Wil je verbinding maken met Wi-Fi-netwerk 'TMNL-A404E1'?

Eenmaal aangesloten kan Thermo uw gegevens automatisch synchroniseren

Als u doorgaat wordt uw apparaat geconfigureerd met Bluetooth.

Annuleren

OK

Verbinding maken met

Ander netwerk selecteren

Ik heb geen Wi-Fi

Selecteer **Volgende**

Thermo is klaar!

Leer nu hoe u het apparaat kunt gebruiken.



Volgende

Selecteer **Volgende**



Leer hoe u een meting uitvoert met Thermo.

Verwijder eerst de dop.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Druk op de knop om Thermo in te schakelen.

Thermo begint meteen met een meting.

Volgende

Selecteer **Volgende**




Scan langs uw voorhoofd totdat Thermo vibreert.

Scannen langs het voorhoofd zorgt ervoor dat Thermo over de heetste plek gaat.

Volgende

Selecteer **Volgende**

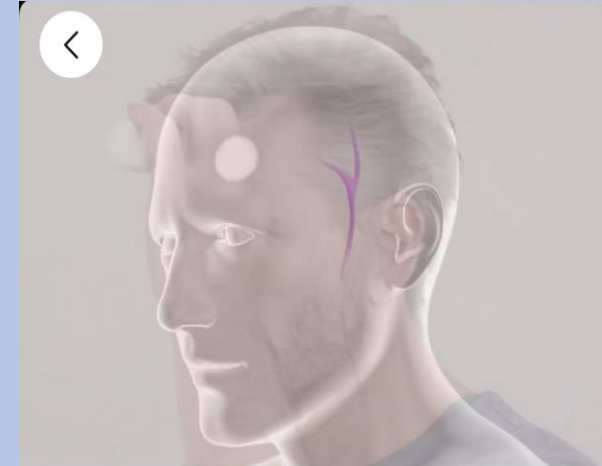


Thermo meet via de temporale slagader.

Het voorhoofd wordt beschouwd als de beste plek om temperatuurveranderingen op te merken.

Volgende

Selecteer **Volgende**

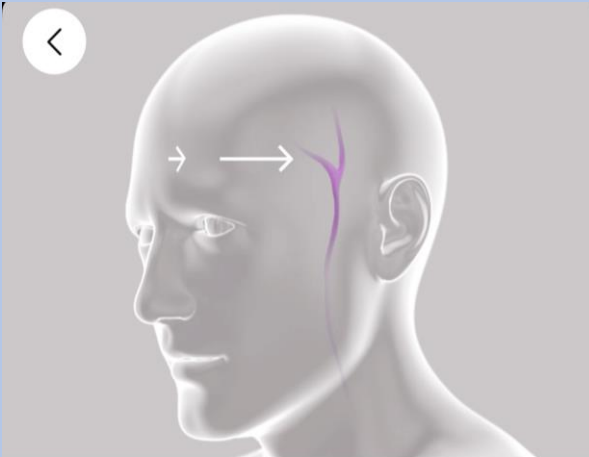


Start in het midden van uw voorhoofd ...

... en beweeg richting de haargrens.

Volgende

Selecteer **Volgende**

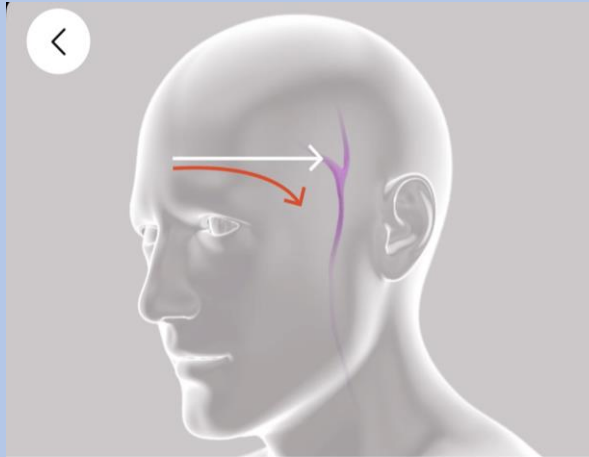

Volg een rechte lijn.

Ga niet naar beneden langs de zijkant van het gezicht. Borstel eventueel aanwezig haar op uw voorhoofd opzij.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Schuif met uw vinger om de meting toe te wijzen.

Schuif uw vinger over de rechterzijde van het Thermo-scherm om door gebruikers te bladeren. Druk op de knop om de meting toe te wijzen.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Druk op de knop om de meting toe te wijzen.

Zo kan Thermo de resultaten personaliseren.

Volgende

Selecteer **Volgende**




Verkrijg uw resultaat.

Thermo geeft kleurgecodeerde resultaten weer waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de gebruiker.

- Geen koorts
- Milde koorts
- Hoge koorts

Volgende

Selecteer **OK**

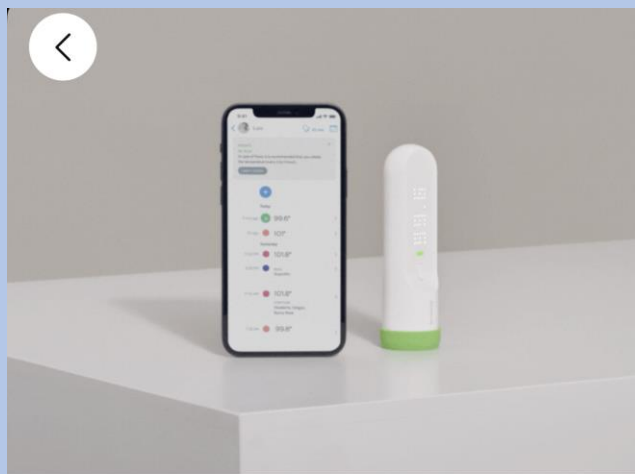

De resultaten worden in de app weergegeven. Hier volgen een paar laatste tips:

- 1 Thermo hoeft niet in contact te komen met uw huid. U kunt hem gebruiken tot op een afstand van ruim een centimeter vanaf de huid.
- 2 Thermo en de persoon die gemeten wordt moeten zich gedurende 10 minuten voor het aflezen in een ruimte bevinden met een stabiele temperatuur.
- 3 Haar dat het voorhoofd bedekt (bijvoorbeeld een pony of haarlokken) kan

OK



Gebruik van uw thermometer

- Haal het groene dopje van de Thermometer af en zet de Thermometer op het midden van uw voorhoofd.
- Druk eenmalig kort het knopje in op de Thermometer.
- Scan vanaf het midden van uw voorhoofd naar de zijkant van uw hoofd in een rechte lijn. De Thermometer trilt als de meting klaar is.
- Veeg op de Thermometer rechts van de temperatuurweergave naar boven tot Box verschijnt.
- Druk eenmalig op de knop van de Thermometer. Wanneer er Box gaat knipperen is het gelukt de meting door te sturen.
- Eventueel kunt u de meting ook uitvoeren in het zachte gebied onder 1 van uw oren, naast het bot en achter uw kaakknopje. Druk eenmalig op het knopje van de Thermometer. De Thermometer trilt opnieuw bij het voltooiën van de meting.
- De meting is nu terug te zien in de Thermo, Withings mate en LUMC Care app en wordt doorgestuurd naar uw elektronisch patiëntendossier

Einde installatie Thermometer

Mocht het na deze stappen toch niet gelukt zijn om de thermometer te installeren, neem dan contact op met Team Box Support.

- Email: boxsupport@lumc.nl

- Telefoon: 071-5297604 (9:00 – 12:00)

Let op! U kunt bij Team Boxsupport alleen terecht voor technische ondersteuning. Medisch kunnen wij niet helpen.

The Box is een ondersteuning van uw zorgtraject om een aanvullend beeld van uw gezondheid te krijgen, het is geen vervanging van de zorg. Voelt u zich niet goed, dan handelt u zoals u altijd doet. U belt de huisarts, poli of 112, afhankelijk van hoe ernstig het is.

THE BOX
THUISMETING VOOR HARTPATIENTEN