



HART LONG
CENTRUM LEIDEN



withings Sleep
Sleep Tracking Mat



withings Thermo
Smart Temporal
Thermometer



withings Move ECG
Activity Watch with ECG Monitor



withings WiFi Smart Blood Pressure
Monitor

Welkom bij de Installatie van de

Ablatie Box



THE BOX

THUISMETING VOOR HARTPATIENTEN

VOORDAT U BEGINT WAT BELANGRIJKE ZAKEN.

1. Lees eerst de gehele handleiding door voordat u zelf een app of apparatuur installeert.
2. Log in met de gegevens die u van het ziekenhuis krijgt. Dit is het e-mailadres wat eindigt op @hlc.nl. Gebruik **NOOIT** uw eigen e-mailadres.
3. U ontvangt eenmalig binnen **3 weken** na het installeren van uw box een bericht of uw metingen goed bij ons binnenkomen.
4. Heeft u zelf moeite met de installatie, vraag dan op voorhand hulp van iemand uit uw directe omgeving (familielid/ kennis).
5. Komen uw gegevens niet direct in de Withings app dan kan het helpen om de app af te sluiten op de achtergrond en opnieuw te openen of bij meten kijken in plaats van thuis.
6. Wat u ziet in de Withings app dat kan het ziekenhuis ook zien, mits u ingelogd staat met het account dat u van het LUMC gekregen hebt.



Wat voor apparatuur zit er in uw Box

Let op dit kan per box verschillen

De apparatuur die u van het ziekenhuis heeft gekregen krijgt u in bruikleen en gebruikt u gedurende het traject "The Box". Bewaar de originele verpakking van de apparatuur. De termijn hiervan bespreekt u met uw behandelend specialist.

Mocht u er geen gebruik meer van maken dan kunt u contact opnemen met de Box Support door te mailen naar boxsupport@lumc.nl.

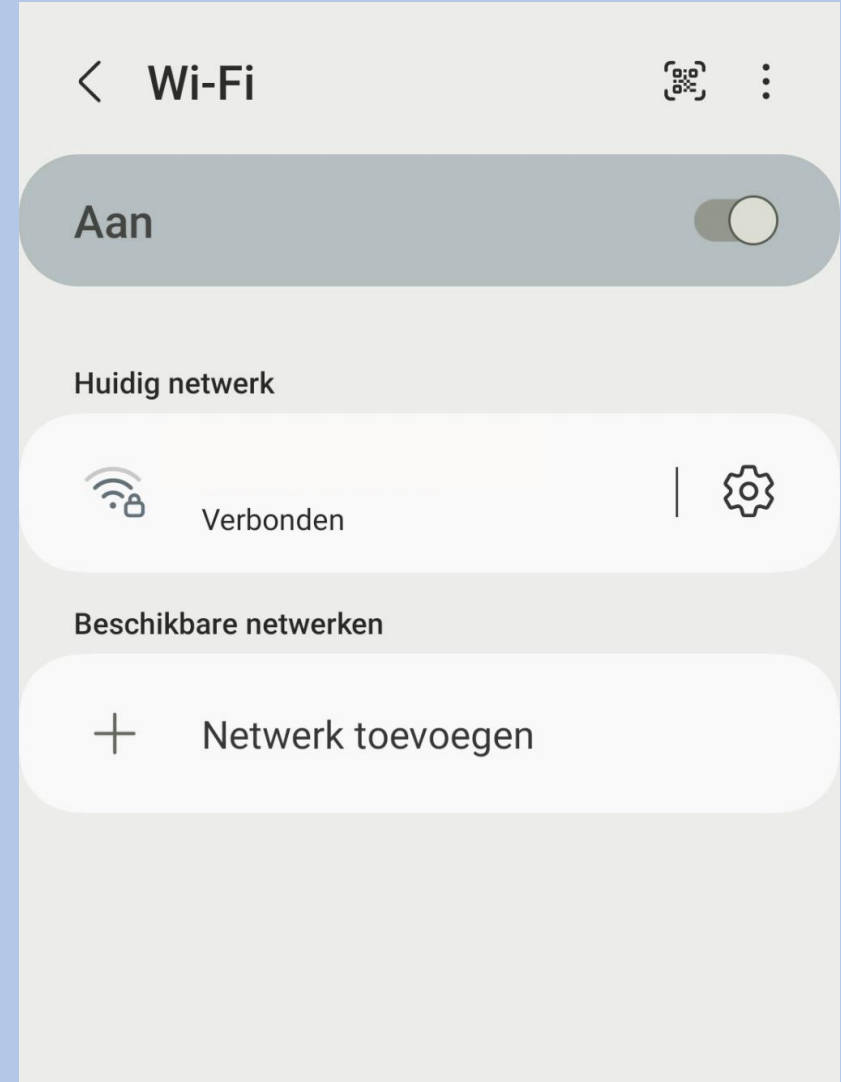
App installatie

U start met de installatie van de apps.

Zorg dat uw Wi-Fi of 4G/5G aan staat anders kunnen de apps niet gedownload worden.

Voor het aanzetten van uw Wi-Fi gaat u naar de instellingen van uw telefoon.


Bij iedere telefoon werkt het anders om de Wi-Fi aan te zetten. Kunt u het niet vinden, vraag dan iemand in uw omgeving om hulp.



Withings app installeren

Withings Health Mate app

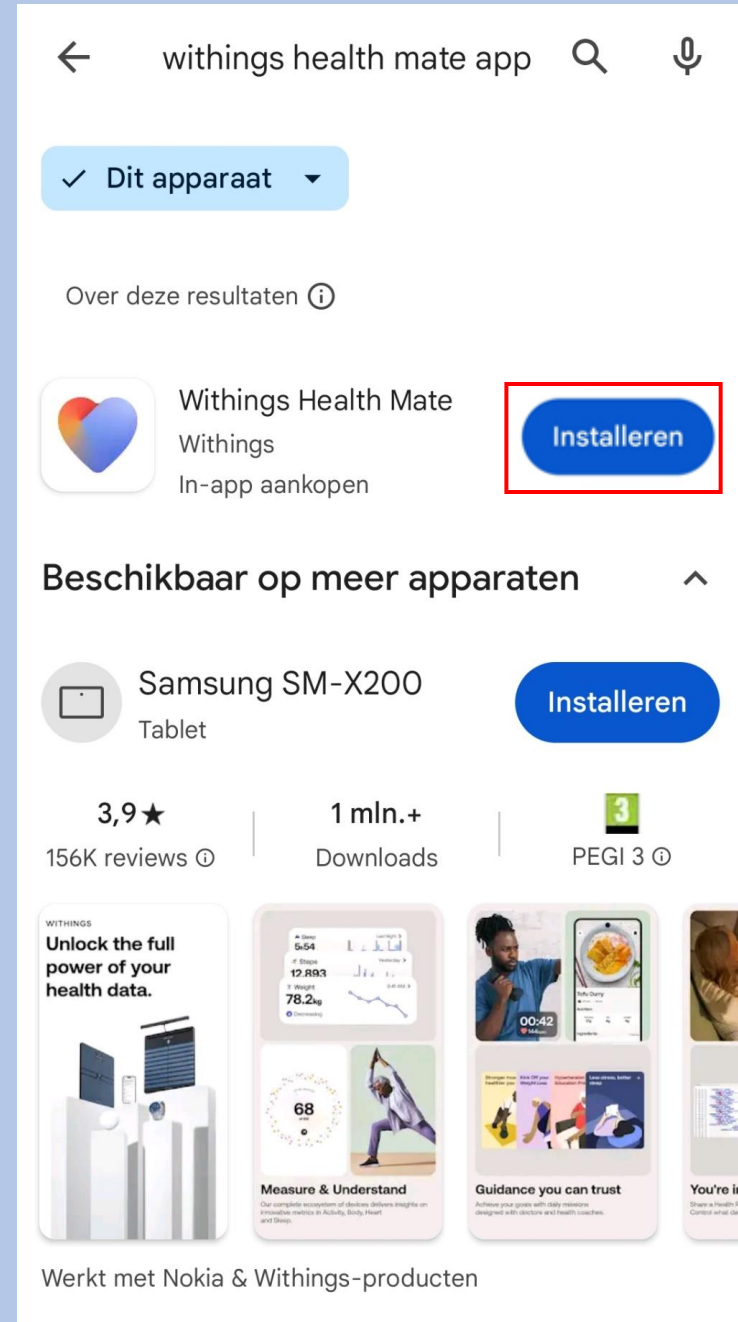1. U gaat naar de **Playstore**.
2. Selecteer in de zoekbalk **Withings Health Mate** in en selecteer installeren, zie afbeelding
3. De **Withings Health Mate app** wordt nu geïnstalleerd op uw telefoon/tablet.




Withings inloggen

Selecteer **Doe mee met Withings app**



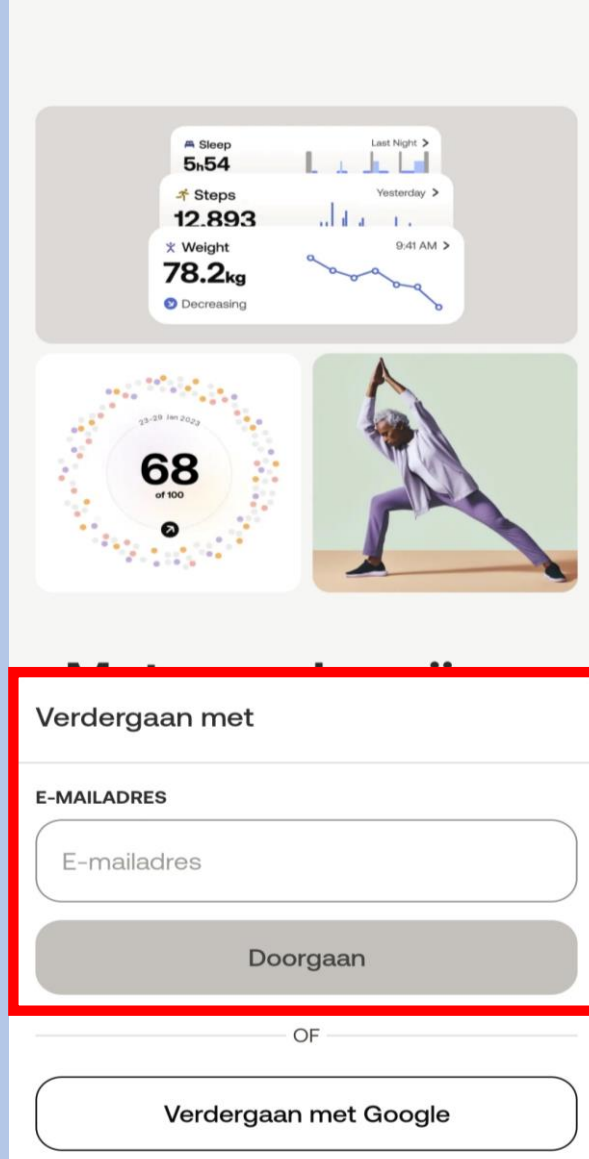Voer het e-mail adres in dat u van het ziekenhuis heeft gekregen, dit eindigt op hlc.nl (zie afbeelding1) Selecteer **Doorgaan**



Selecteer het kleine zinnetje **Zie opties**




Afbeelding 1



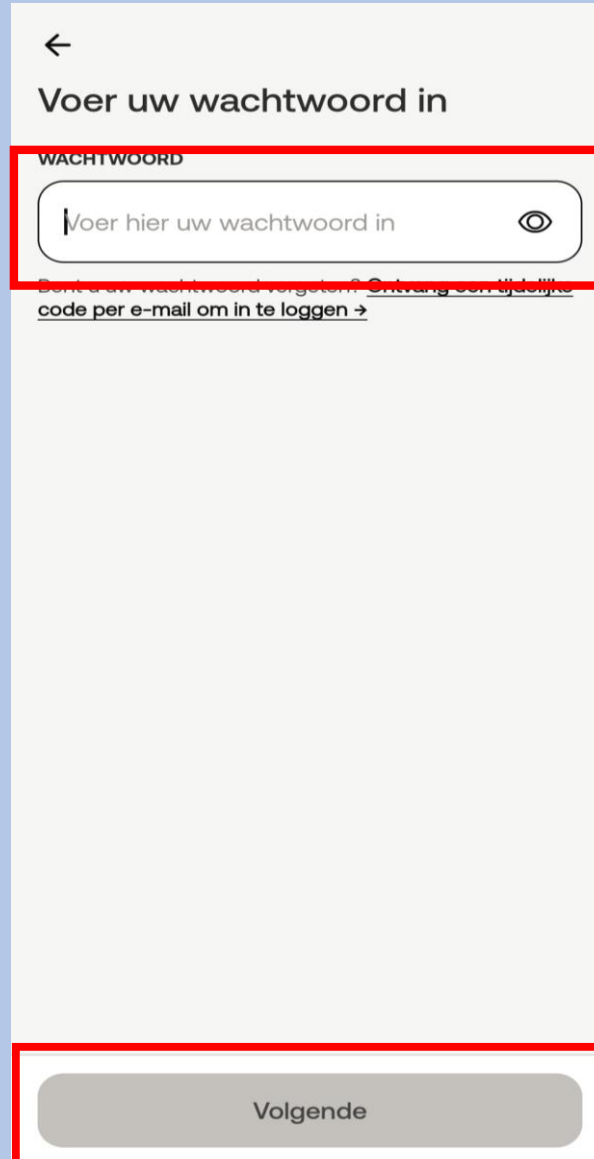Selecteer **Inloggen met wachtwoord** en **Volgende**




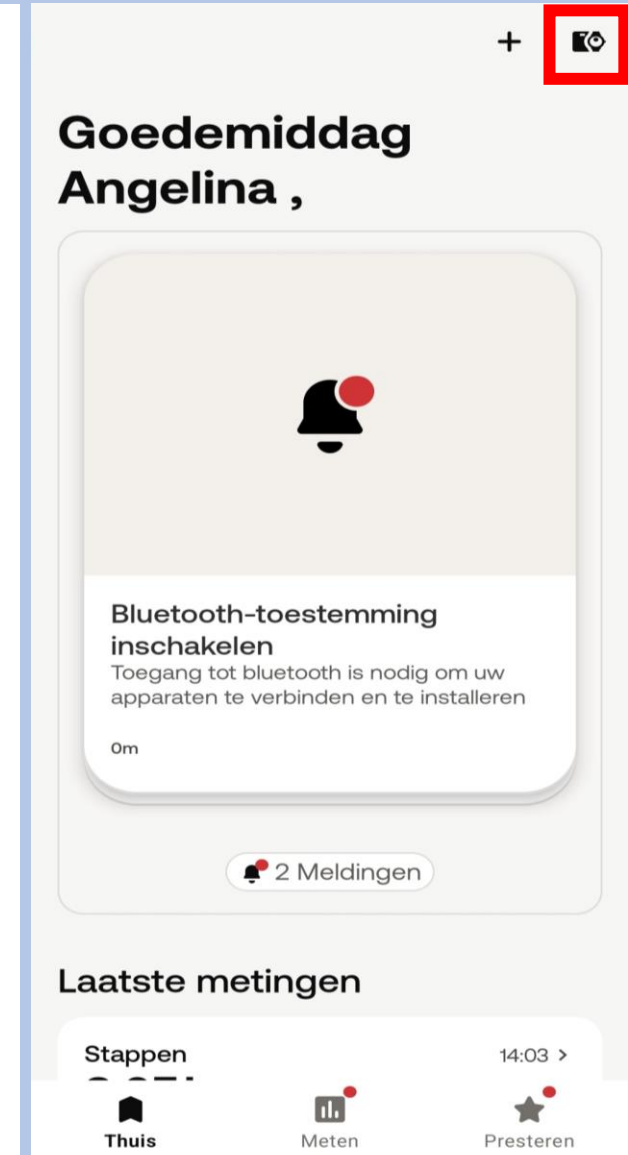
Voer het wachtwoord in dat u van het ziekenhuis heeft gekregen, dit staat vermeld op uw afgifteformulier; zie afbeelding 1. Selecteer vervolgens **Volgende**



Afbeelding 1



Selecteer  om een apparaat toe te voegen aan de app




Apparatuur installeren van Withings

- Nu gaat u het volgende installeren:
- Weegschaal
- Bloeddrukmeter
- Scanwatch

Let op! Elke Ablatie box kan verschillen van apparatuur. Mocht u het apparaat niet hebben scroll dan door naar de volgende.

Nu gaat u de weegschaal installeren vervolg het stappenplan.



Selecteer rechts bovenin  Om een apparaat te koppelen



Goedemiddag Angelina ,



Bluetooth-toestemming inschakelen

Toegang tot bluetooth is nodig om uw apparaten te verbinden en te installeren

Om

2 Meldingen

Laatste metingen

Stappen

14:03 >



Thuis



Meten



Presteren

Selecteer **Installeer een apparaat**



Installeer een apparaat

Ontdek onze Health Products

Selecteer **Weegschalen**



Kies het product dat je wilt instellen



Weegschalen >



Horloges >



Trackers >



Bloeddrukmeters >



Slaapsensoren >



Thermo >



Aura >

Selecteer **Body**



Weegschalen



Body Scan >



Body Comp >



Body Smart >



Body Cardio >



Body+ >



Body >

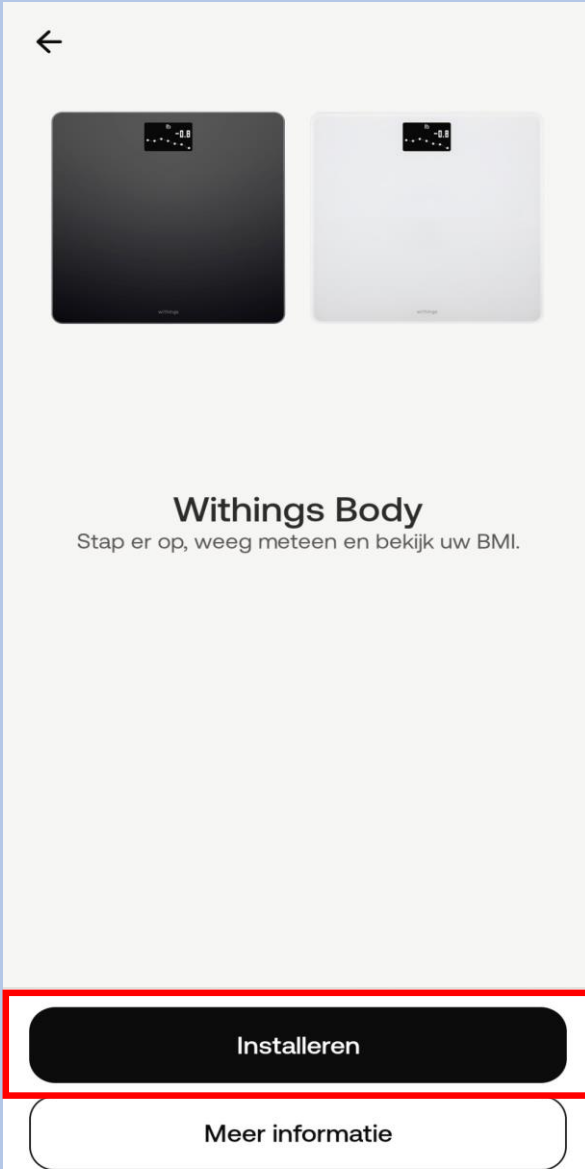


Body Pro >




Smart Body Analyzer >

Selecteer **Installeren**



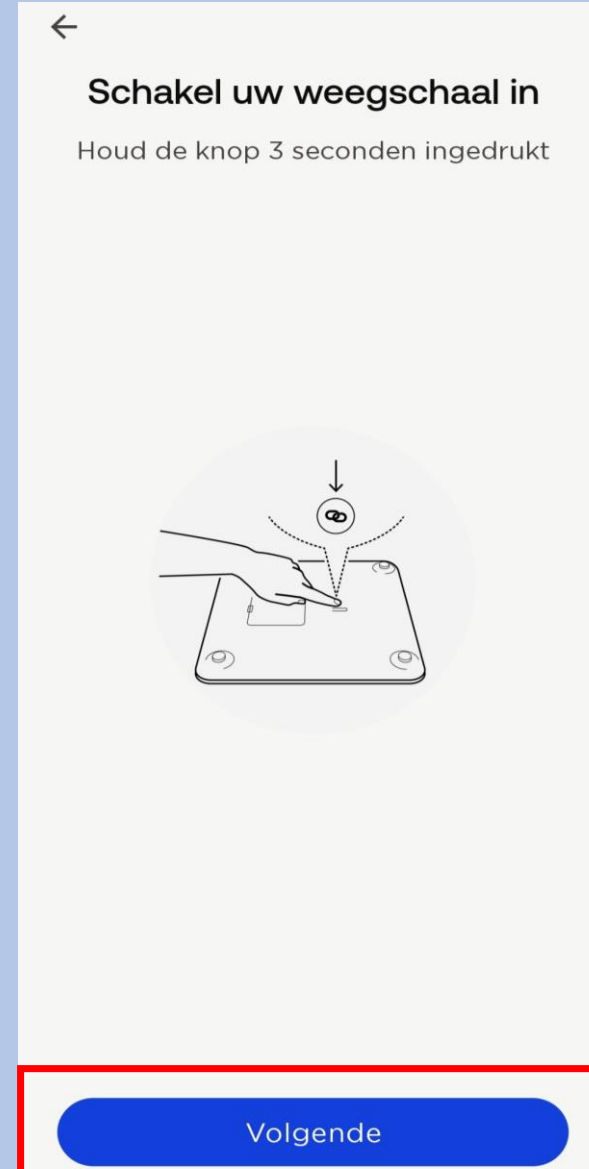1. U haalt de **Weegschaal** uit de doos.
2. Onder op de **Weegschaal**, bij de batterijen, vindt u een labeltje dat u er uit trekt.
3. U houdt het knopje **3 hele seconden ingedrukt**.
4. Selecteer **Volgende** op de app zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast.



Er kan een pop up verschijnen.
Let op dit gebeurd niet bij alle
apparaten **selecteer Koppelen**

Bezig met het maken van een verbinding...

Als er geen pop-up verschijnt,
controleer dan uw meldingencentrum



Bluetooth-koppelverzoek

Koppelen aan Body 9C?

Annul.

Koppelen

Selecteer **volgende**

Body weegschaal gedetecteerd

Body 9C



Volgende

Niet uw apparaat?

Selecteer Ik heb geen Wi-Fi of
kies voor uw eigen WiFi network
en over uw wachtwoord in

Wi-Fi-instelling

Instellen van een Wi-Fi-verbinding

Ik heb geen Wi-Fi-netwerk
Indien u geen Wi-Fi netwerk hebt,
worden gegevens via Bluetooth
verstuurd.

Voer onderstaande in en
selecteer **Opslaan**

← Schermen personaliseren

Inbegrepen metingen

Gewicht

— Lichaamsgewicht-index (BMI) ≡

Meer schermen

Gewichtstrend ⓘ

Weer ⓘ

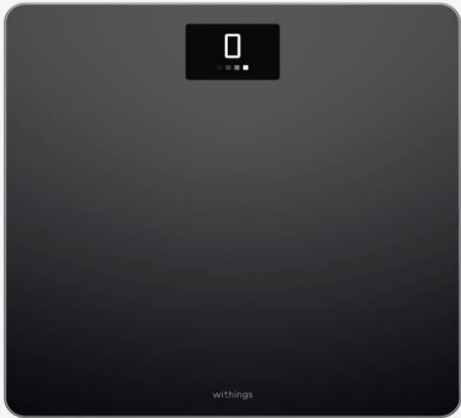
Stappen ⓘ

Opslaan

Selecteer **Volgende**

De instelling is klaar!

Laten we eens kijken hoe u het meest uit uw weegschaal haalt




Volgende

Selecteer **Over slaan**

Een streefgewicht instellen

Of u nu zwaarder wilt worden, gewicht wilt verliezen of uw gewicht wilt behouden, het blijft altijd fantastisch om naar iets toe te werken.



Over slaan

Volgende

Selecteer **Over slaan**



Neem er de tijd voor

Er kunnen pijlen worden weergegeven om u te helpen. Het scherm knippert als u op de juiste plek staat. Blijf op de weegschaal staan tot de metingen voltooid zijn.



Over slaan

Volgende

Selecteer **OK**

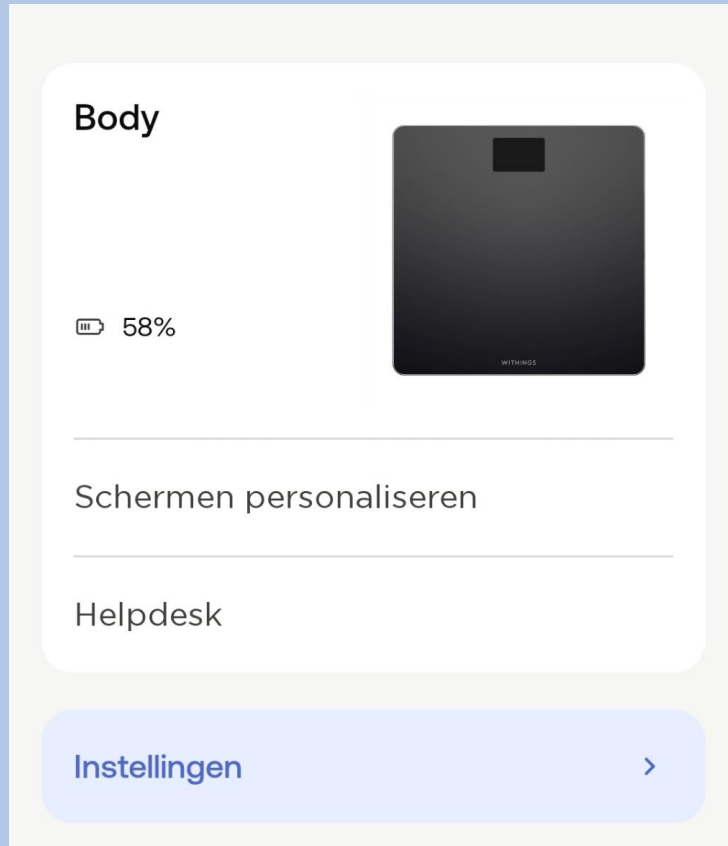
Laten we het eens proberen

Het is tijd om op de weegschaal te gaan staan. Kijk hier weer na een paar minuten om uw metingen te zien.



OK

Uw **Weegschaal** is klaar voor gebruik en staat in de lijst van apparatuur



De weegschaal kan via uw Wi-Fi netwerk worden geïnstalleerd voor meer bereik.

Dit kunt u vinden via:

Apparaten → Body → instellingen → Configuratie → instellen van een Wi-Fi verbinding.

Via de weegschaal kunt u uw streefgewicht, het weer of uw BMI instellen. Dit kunt u vinden via: Apparaten → Schermen personaliseren.

In de doos vindt u pootjes voor de weegschaal, voor als u thuis vloerbedekking heeft.


Weging maken

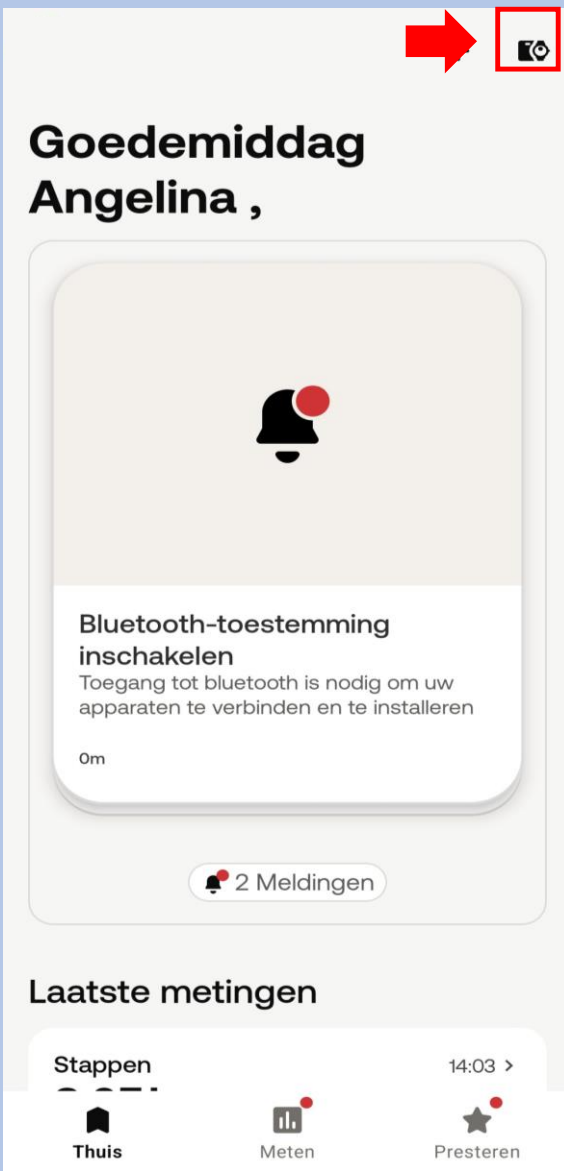
Om een betrouwbare meting te krijgen, zijn de volgende punten belangrijk:

- Weeg dagelijks op ongeveer hetzelfde moment en onder dezelfde omstandigheden (bijvoorbeeld met of zonder kleding).
- Verplaatst u de weegschaal, wacht dan 10 seconden voordat u start met wegen.
- Staat de weegschaal op een tapijt, gebruik dan de tapijtdopjes die meegeleverd zijn bij de weegschaal.


1. Ga op de weegschaal staan.
2. U ziet het gewicht verschijnen op het schermje van de weegschaal.
3. De meting is nu ook terug te zien in de LUMC Care app; daar kan enige vertraging in zitten.




Selecteer rechts bovenin 
Om een apparaat te koppelen




Selecteer **Installeer een apparaat**

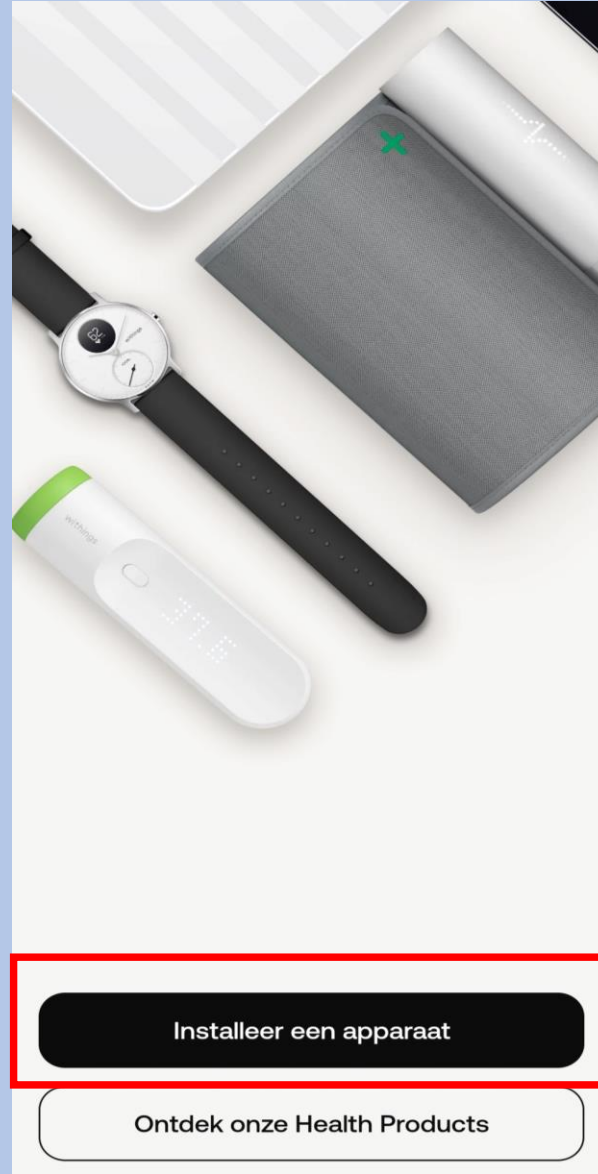

Selecteer **Bloeddrukmeter**

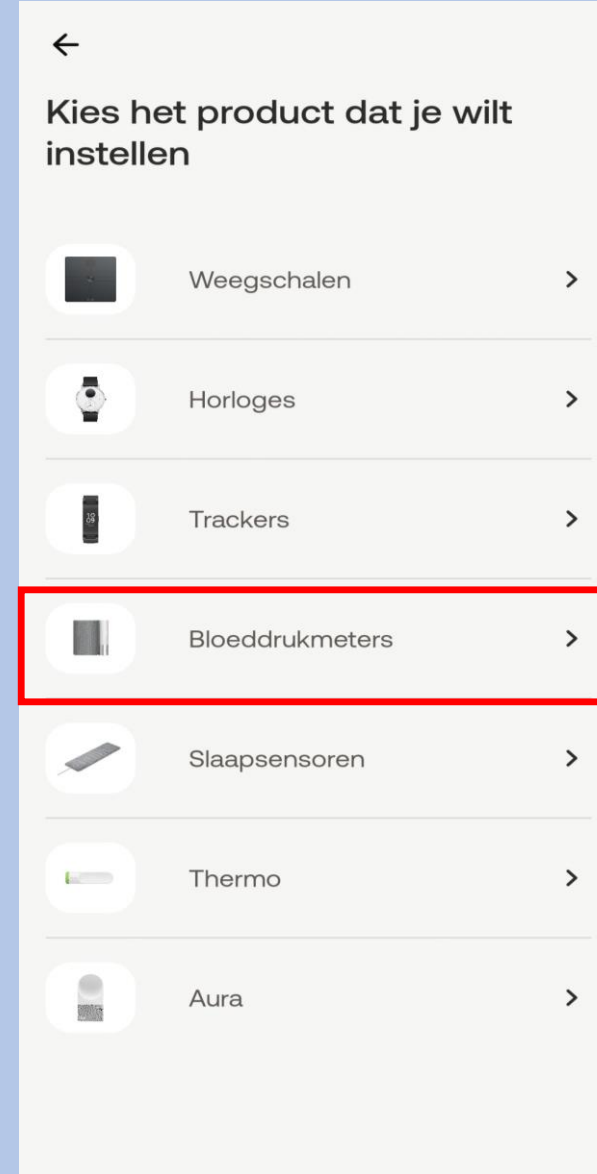

Selecteer **BPM Connect**

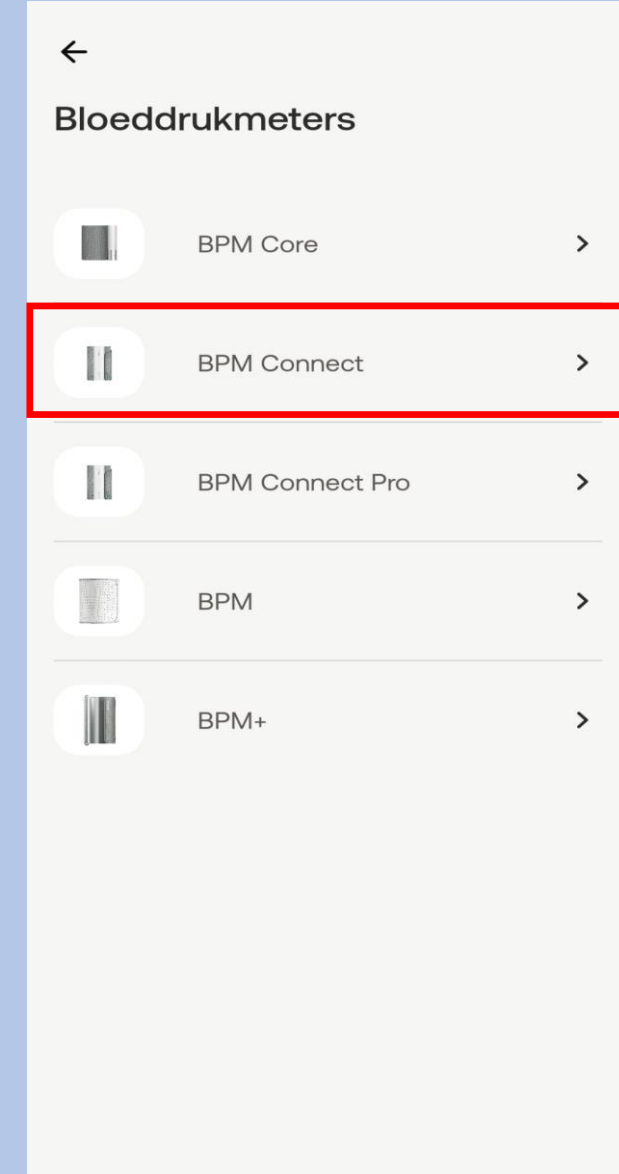

Selecteer **Installeren**



BPM Connect

Een medisch correcte bloeddrukmeting in uw vertrouwde omgeving.

Installeren

Meer informatie

Selecteer **Toestaan**



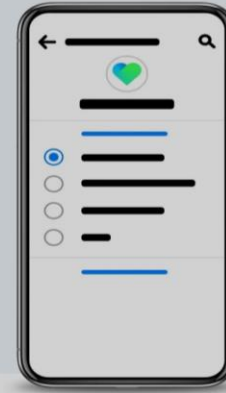
'Apparaat in de buurt'-toestemmingen

Voor Withings App moeten de 'Apparaat in de buurt'-toestemmingen ingeschakeld zijn om Withings-producten in de buurt via Bluetooth te ontdekken en er verbinding mee te maken.

Toestaan

Meer informatie

Selecteer **Toestaan**



'Apparaat in de buurt'-toestemmingen

Voor Withings App moeten de 'Apparaat in de buurt'-toestemmingen ingeschakeld zijn om Withings-producten in de buurt via Bluetooth te ontdekken en er



Toestaan dat **Withings** apparaten in de buurt vindt, er verbinding mee maakt en de relatieve positie bepaalt?

Toestaan

Niet toestaan

Houd de knop op de BPMConnect ingedrukt tot er **Setup** verschijnt en selecteer dan in de app op **Volgende**



Aan de slag!

Houd de knop 3 seconden ingedrukt



Volgende

Er kan een pop up verschijnen.
Let op dit gebeurd niet bij alle apparaten

Selecteer **Volgende**

Selecteer Ik heb geen Wi-Fi of kies voor uw eigen WiFi network en over uw wachtwoord in, dit is uw eigen keus.

Selecteer **OK**

Bezig met het maken van een verbinding...

Als er geen pop-up verschijnt, controleer dan uw meldingencentrum



Bluetooth-koppelverzoek

Koppelen aan BPM Connect D4?

Annul.

Koppelen

BPM Connect gedetecteerd

BPM Connect D4



Volgende

Wi-Fi-instelling

Instellen van een Wi-Fi-verbinding

Ik heb geen Wi-Fi-netwerk
Indien u geen Wi-Fi netwerk hebt, worden gegevens via Bluetooth verstuurd.

Uw BPM Connect is er klaar voor!

We gaan u nu helpen om uw eerste bloeddrukmeting uit te voeren.



OK

Selecteer **Volgende**



Ga er, voordat u begint, even goed voor zitten en ontspan.

Ga 5 minuten rustig zitten. Houd uw rug recht, uw voeten naast elkaar op de grond (sla uw benen dus niet over elkaar) en praat niet.

Volgende

Selecteer **Volgende**

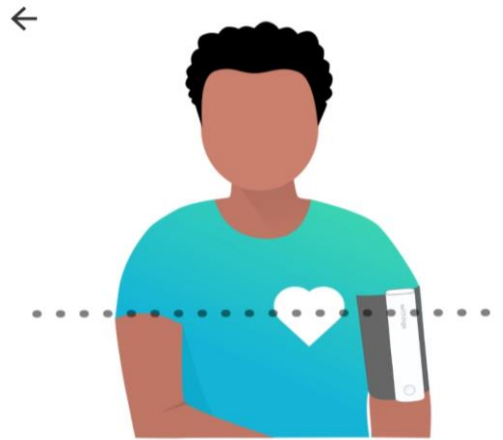


Stroop uw mouw op en doe het apparaat om uw LINKERARM.

De manchet moet direct op de huid worden geplaatst met de cilinder aan de binnenkant van uw arm. Houd de knop aan de onderkant.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Houd BPM Connect ter hoogte van uw hart.

Voor het beste resultaat moet het Withings-logo zijn uitgelijnd met uw hart.

Volgende

Selecteer **Mijn eerste meting doen**



Laten we uw eerste meting doen

Stel de BPM af op uw arm, zoals hieronder afgebeeld. Met één druk op de knop wordt de meting ingeschakeld, met een tweede druk op de knop wordt de meting gestart.



Mijn eerste meting doen

Selecteer **OK**

Uw bloeddrukmeter is geïnstalleerd
en staat in de lijst van apparaten.




Dat is alles! De volgende keer hebt u uw telefoon hier niet meer bij nodig.

Hopelijk was alles duidelijk en hebt u het proces zonder problemen kunnen doorlopen. U kunt deze uitleg overigens altijd opnieuw raadplegen in het onderdeel Apparaten van de Health Mate-app.

OK

BPM Connect



32%

Wi-Fi-instelling

x3 meetintervaltijd **60sec**

Helpdesk

Instellingen >

Informatie over de bloeddrukmeter

Uw bloeddrukmeter kan via uw Wi-Fi netwerk geïnstalleerd worden voor meer bereik. Dat kunt u op de volgende manier doen:
Apparaten → Wi-Fi – instelling

De bloeddrukmeter loopt op een accu die in de app aan geeft wanneer de accu bijna leeg is. Via de kabel kunt u de bloeddrukmeter opladen. Deze zit in het doosje van de bloeddrukmeter. Gooi uw doosje niet weg!

De bloeddrukmeter heeft twee functies:
1 x meten of 3 x meten.
1 x meten is voldoende.



Bloeddrukmeting maken

Om een betrouwbare meting te krijgen, is het belangrijk dat u ontspannen bent. Vermijd activiteit, eten, drinken, roken of een bad 30 minuten voor de meting.

Meet circa twee uur na de inname van uw medicatie, zo kan de zorgverlener zien wat de medicatie doet met uw bloeddruk.

1. Zorg ervoor dat u prettig zit en ontspannen bent:

- Beide benen op de grond
- Verwijder kleding die u bovenarm bedekt (mouwen niet oprollen)
- Blijf 5 minuten zo zitten voordat u start met meten

2. Wikkel de grijze manchet om uw linker bovenarm.

Het apparaat moet aan de binnenkant van uw arm zitten op uw ader, ter hoogte van uw elleboog.

3. Leg uw arm op de tafel zodat uw arm op dezelfde hoogte is als uw hart.


4. Druk op het knopje van de BPM, u ziet dan een plusje verschijnen. Vervolgens staat er BPM. Druk vervolgens kort nog 1 keer op de knop, de BPM start met het maken van een meting.

5. De meting wordt aangegeven op de BPM. Druk de knop nogmaals in en er verschijnt nu het woord Box. Druk nogmaals wat langer de knop in en er verschijnt dan een vinkje dat het gelukt is.

6. De meting is nu terug te zien in de LUMC Care app en wordt doorgestuurd naar uw elektronisch patiëntendossier.

Let op: Uw bloeddrukmetingen zijn het meest betrouwbaar wanneer u telkens dezelfde arm gebruikt voor de meting en tijdstip.



Selecteer rechts bovenin  Om een apparaat te koppelen



Goedemiddag
Angelina ,



Bluetooth-toestemming inschakelen

Toegang tot bluetooth is nodig om uw apparaten te verbinden en te installeren

Om

 2 Meldingen

Laatste metingen

Stappen

14:03 >



Thuis



Meten



Presteren

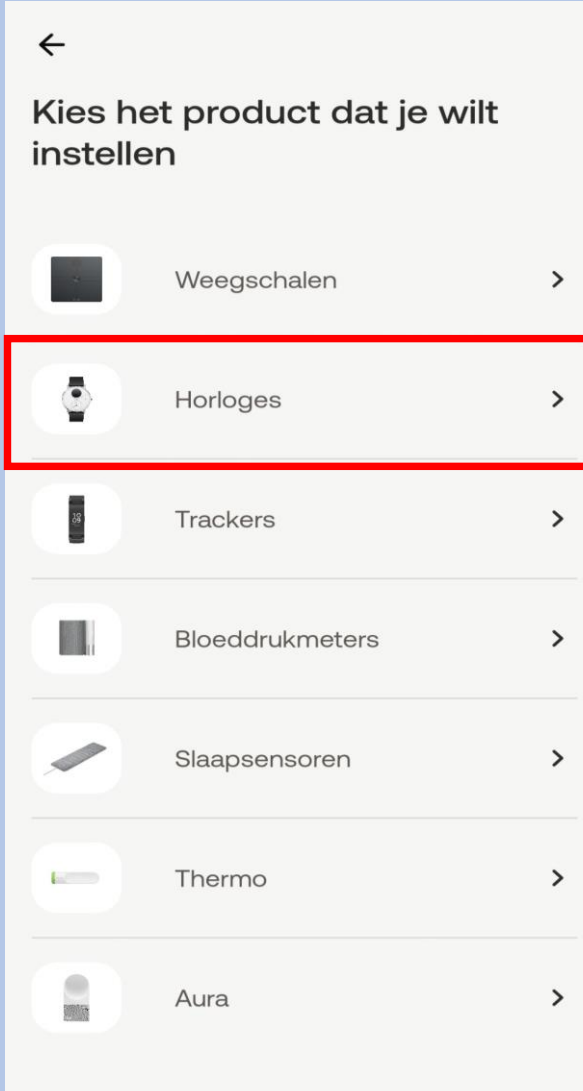
Selecteer **Installeer een apparaat**



Installeer een apparaat

Ontdek onze Health Products

Selecteer **Horloges**



Kies het product dat je wilt instellen



Weegschalen



Horloges



Trackers



Bloeddrukmeters



Slaapsensoren



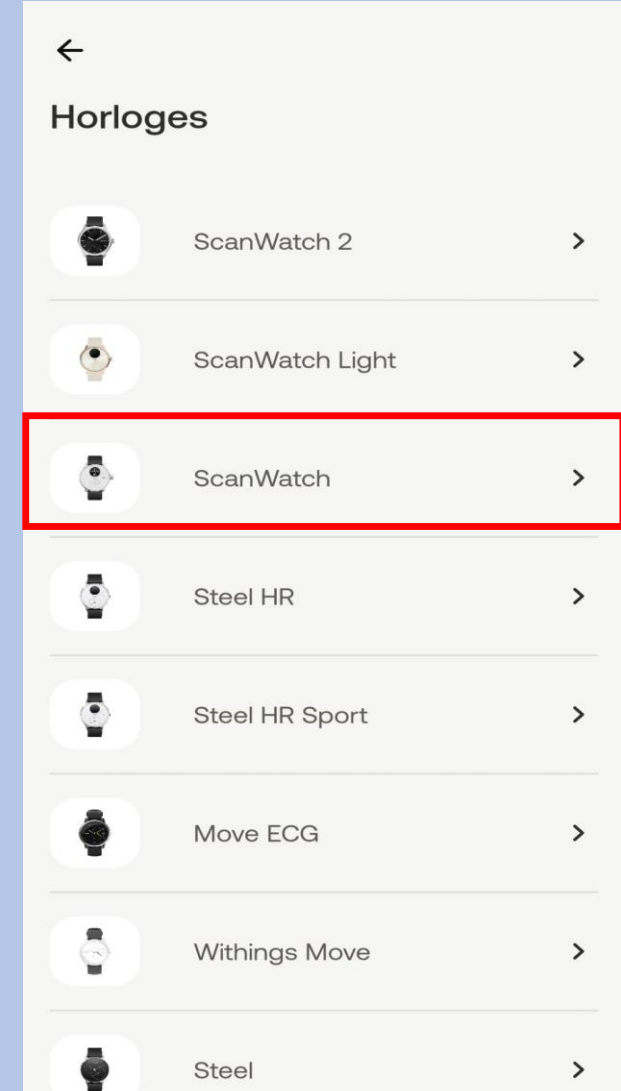
Thermo



Aura



Selecteer **Scanwatch**



Horloges



ScanWatch 2



ScanWatch Light



ScanWatch



Steel HR



Steel HR Sport



Move ECG



Withings Move



Steel

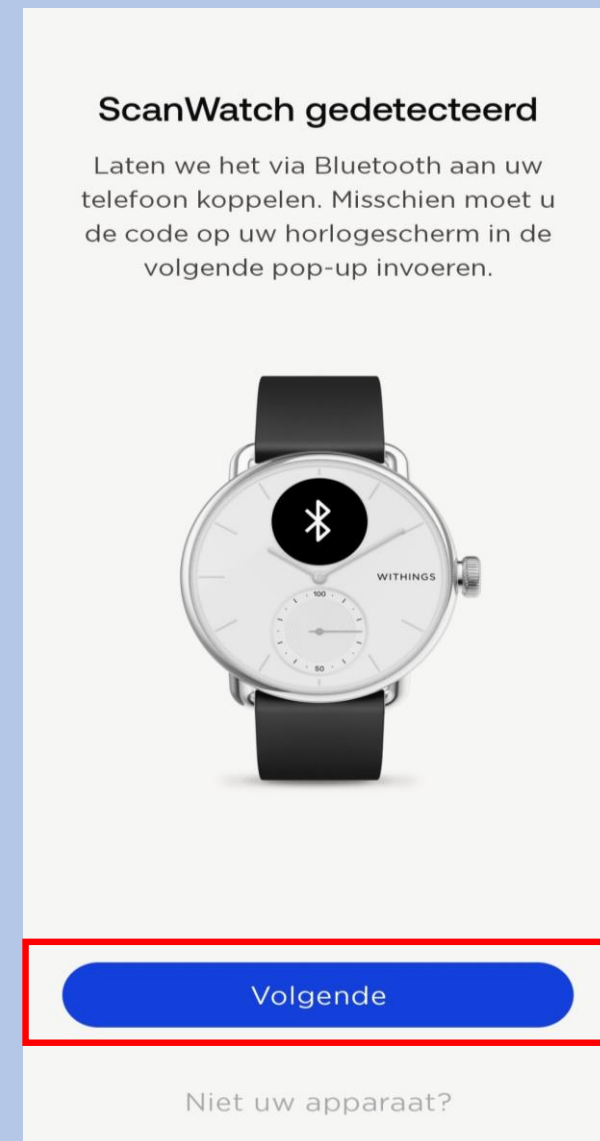
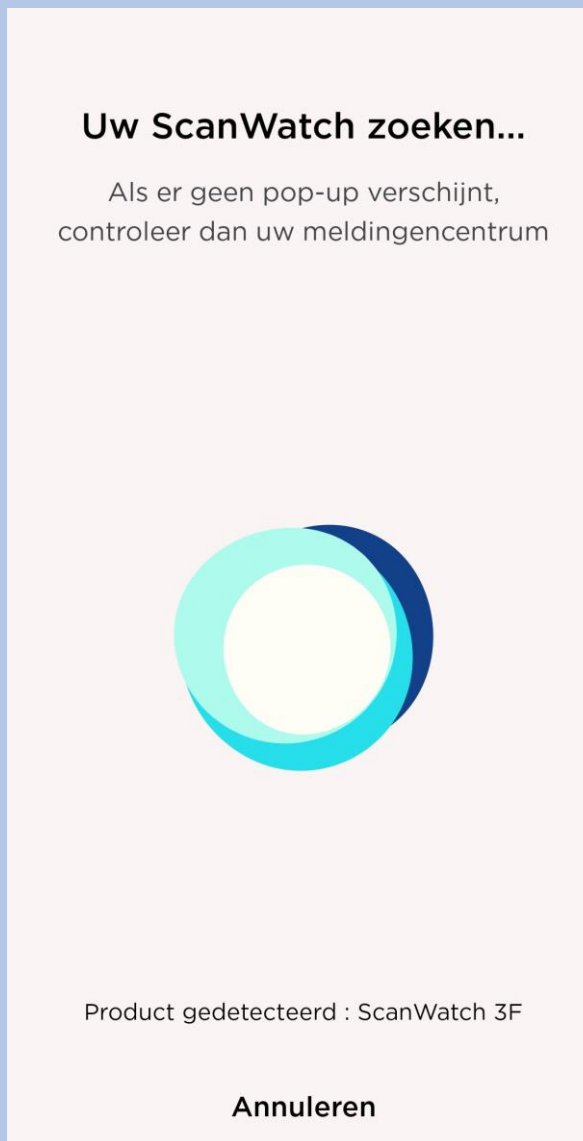
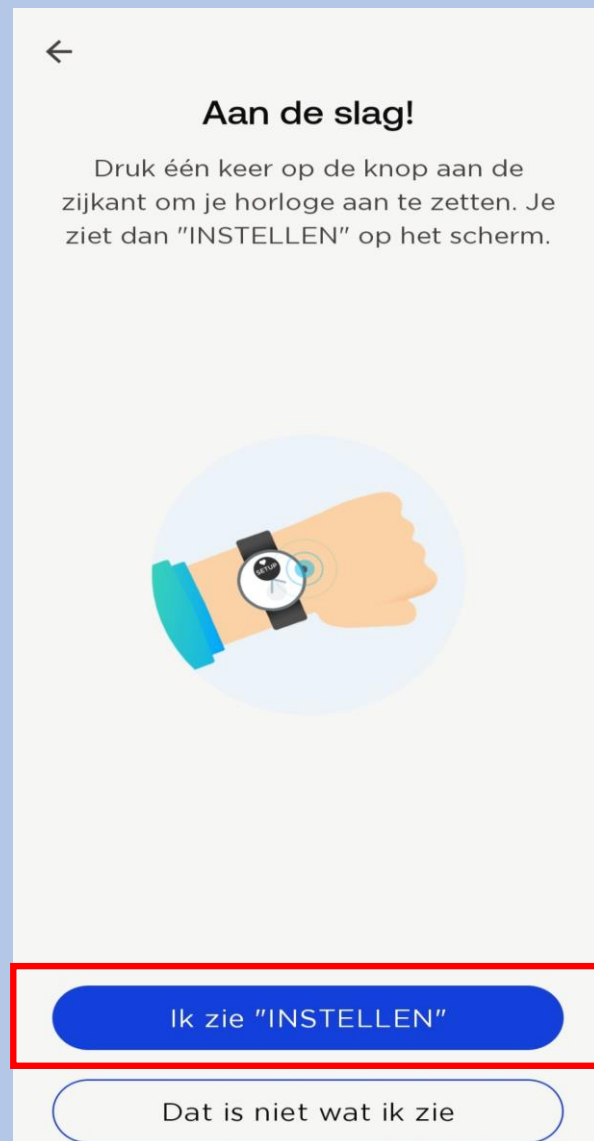


Selecteer **Installeren**

Druk eenmaal op de knop van uw Scanwatch
en op het scherm van uw horloge
verschijnt **“Hello setup”** ga direct
naar de volgende screenshot
Selecteer **Ik zie “INSTELLEN”**

Er kan een pop up verschijnen. Let
op dit gebeurd niet bij alle
apparaten **Selecteer dan koppelen**

Selecteer **volgende**



Nu zal er een **code verschijnen op uw horloge** die u invoert op uw telefoon/tablet. Let op! negeer de tekst 0000 of 1234 dit klopt niet. Voer de pincode in en selecteer koppelen, vervolgens **Pair**

Koppel uw ScanWatch met uw telefoon

Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogescherf in de volgende pop-up invoeren.



Pair

Koppel uw ScanWatch met uw telefoon

Laten we het via Bluetooth aan uw telefoon koppelen. Misschien moet u de code op uw horlogescherf in de volgende pop-up invoeren.

Bluetooth-koppelverzoek

Geef pincode in om te koppelen met ScanWatch 23 (probeer 0000 of 1234).

Pincode
Gewoonlijk 0000 of 1234

Annul.

Koppelen



Selecteer **volgende**

Verbonden met uw ScanWatch



Volgende

Selecteer uw **Box naam**

Wie zal dit apparaat gebruiken?

Box

Annuleren

Uw horloge zal nu updaten.
Let op niet elk horloge heeft
aan het begin een update
nodig

0%

We updaten ScanWatch om u de
nieuwste ervaring te kunnen bieden.
Houd de toepassing open totdat de
update voltooid is.



Uw horloge word opnieuw
opgestart. Soms kan dit
enige tijd duren

Uw ScanWatch wordt
opnieuw opgestart...



Selecteer **Ja** als de wijzers
omhoog staan

Wijzen de wijzers van het
horloge omhoog?

De uren- en minutenwijzers moeten
op de 12 staan en de bewegingswijzer
moet op 100% staan



Nee

Ja

Selecteer **Volgende**

Uw horloge toont nu de juiste
tijd.



Nog eens
proberen

Volgende

Uw horloge word geconfigureerd
Dit kan even duren

Uw ScanWatch wordt
geconfigureerd...



Selecteer **Volgende**

Uw ScanWatch is er klaar
voor!

We leiden u nu door een aantal
functies van uw horloge.



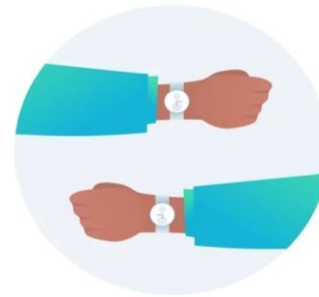
Volgende

Selecteer de pols waaraan u het
horloge gaat dragen.
Let op dat u bij het maken van een
ECG u het horloge aan de opgegeven
pols draagt



Om welke pols gaat u uw
apparaat dragen?

Geef aan om welke pols u uw horloge
draagt.



Linkerpols

Rechterpols

Selecteer **Begrepen**

Zo moet ScanWatch worden
gedragen.

Uw horloge moet een vingerbreedte
boven uw polsbeen aan uw pols
worden vastgemaakt. Het dragen van
een zachte polsband verbetert de
automatische metingen.



Begrepen

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



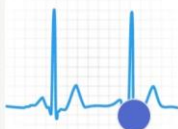
Navigeren in ScanWatch

NOG NIET GEZIEN



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste elektrocardiogram uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

NOG NIET GEZIEN

Later voltooien

Let op nu volgt de uitleg van het gebruik van het horloge.

Volg de stappen goed en lees alles goed door. Het horloge bevat vele opties.

De opties die wij selecteren zijn suggesties. Mocht u andere keuzes maken is dit geheel uw eigen keuze. Let op; hoe meer opties u selecteert of toestemming u geeft hoe sneller het horloge leeg zal zijn.

Instellingen kunt u altijd later in de Withings app aanpassen mocht dit nodig zijn.

Het is belangrijk dat u de Ecg functie accepteert en activeert anders kan het horloge geen Ecg maken.

Dit kunt u vinden als u het stappenplan hervat.

Mocht u voor extra opties kiezen, houd u er rekening mee dat uw arts of verpleegkundig specialist dit niet zal beoordelen.

Nu kunt u de installatie hervatten.

Let op de volgorde verschilt per installatie.

Selecteer **de aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer



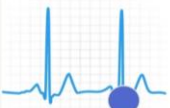
Navigeren in ScanWatch

NOG NIET GEZIEN



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste elektrocardiogram uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

NOG NIET GEZIEN

Later voltooiën

Selecteer **Volgende**



Druk op de kroon om het horloge uit de sluimerstand te halen.

Zo krijgt u toegang tot functies op het apparaat.



Volgende

Selecteer **Volgende**



Draai aan de kroon om te bladeren, druk erop om te selecteren.

Als u aan de kroon draait, verandert het menu. Met een korte druk op de kroon bevestigt u de actie.



Volgende

Selecteer **de aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Meldingen activeren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste elektrocardiogram uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

NOG NIET GEZIEN





Meer informatie over episodes met onregelmatige hartslag

NOG NIET GEZIEN

Later voltooiën

Keus is aan uzelf of u de meldingen wilt activeren. Kies voor pijltje terug.

  ngen

Het horloge zal zachtjes trillen wanneer je een melding ontvangt.


Gezondheidsmeldingen
Stel in welke gezondheidsmeldingen u op het horloge wilt ontvangen.


Meldingen inschakelen
Het horloge zal zachtjes trillen wanneer je een melding ontvangt.


Binnenkomend telefoongesprek

Berichten

Toepassingen
Kies ervoor om telefoonmeldingen op het horloge te ontvangen.

 &easy

 ABOUT YOU

 Ad-Free Reading Lamp

Selecteer **het aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken
Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.

 **Uw eerste electrocardiogram uitvoeren**
NOG NIET GEZIEN

 **Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren**
NOG NIET GEZIEN

 **Meer informatie over episodes met onregelmatige hartslag**
NOG NIET GEZIEN

 **Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag**

Selecteer **Starten**







Uw ScanWatch kan een ECG van medische kwaliteit opnemen

Bij elke hartslag gaat er een elektrische impuls door uw hart, waardoor het een pompbeweging maakt. Het ECG registreert de snelheid waarmee dit gebeurt.

Selecteer **Volgende**

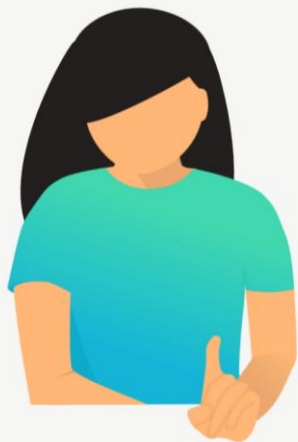




ScanWatch kan AFib detecteren.

Atriumfibrilleren treedt op als het hart te snel en onregelmatig samentrekt.

Selecteer **Volgende**



ScanWatch kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of u denkt een hartaanval te hebben? Neem dan contact op met uw arts of de hulpdiensten.

Volgende

Selecteer **Accepteren en activeren**



Raadpleeg deze gebruiksinstructies.

Tik voor meer informatie



Accepteren en activeren

Selecteer **Volgende**



We gaan uw eerste ECG-meting uitvoeren!

- 1 Zit stil en praat niet.
- 2 Plaats uw arm op een tafel of arMLEuning en ontspan.

ⓘ Het kan moeilijker zijn om een overtuigend ECG-resultaat te krijgen als u een andere band draagt dan silicone, FKM of gelijkwaardig.

Volgende

Selecteer **Annuleren**



ANNULEREN

Uw eerste ECG-meting nu uitvoeren



Selecteer het aangegeven kolom

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

NOG NIET GEZIEN



Meer informatie over episodes met onregelmatige hartslag

NOG NIET GEZIEN



Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag configureren

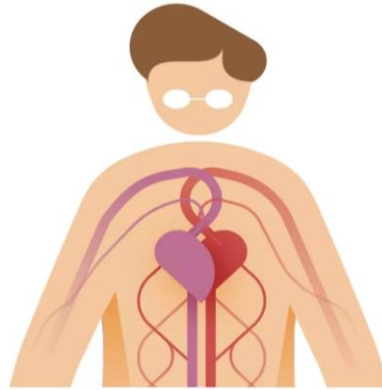
NOG NIET GEZIEN



Scans ademhalingsstoornisse

Later voltooien

Selecteer Starten



De ScanWatch kan het zuurstofgehalte in uw bloed meten

Zuurstofsaturatie van arteriële hemoglobine (of SpO₂) beoordeelt de hoeveelheid zuurstof in uw rode bloedcellen. Elke meting wordt op het horloge uitgevoerd en duurt 30 seconden.

Starten

Selecteer Accepteren en activeren



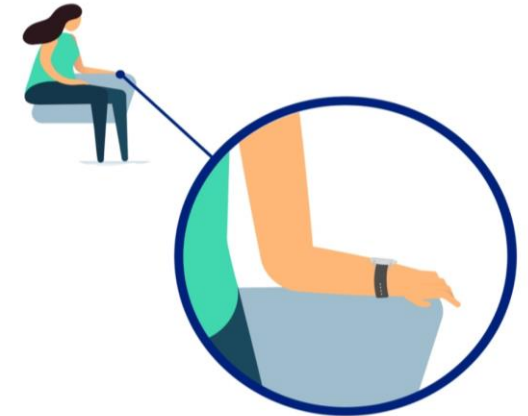
Raadpleeg deze gebruiksinstructies.

Tik voor meer informatie



Accepteren en activeren

Selecteer Volgende



We gaan uw eerste zuurstofmeting doen.

- 1 Blijf stilzitten, praat niet en ontspan.
- 2 Plaats uw arm en elleboog op een tafel of arMLEuning.
- 3 Zorg dat uw polsband strak zit en houd de palm van uw hand open en plat.

Volgende

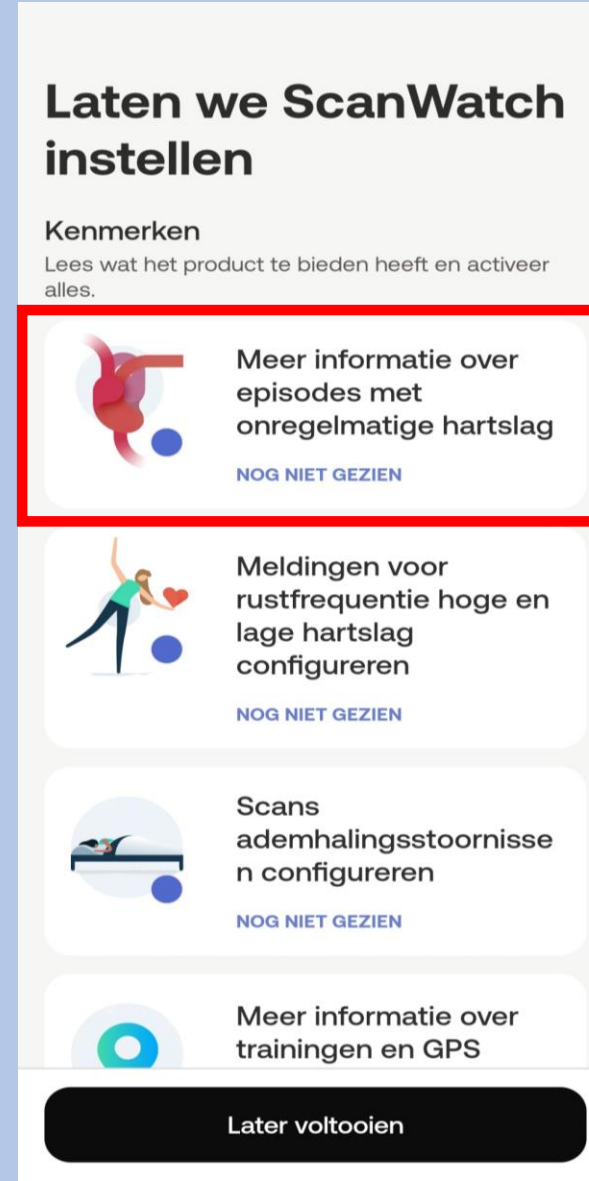
Selecteer **Over slaan**



Selecteer **Begrepen**




Selecteer **het aangegeven kolom**



Selecteer **Starten**



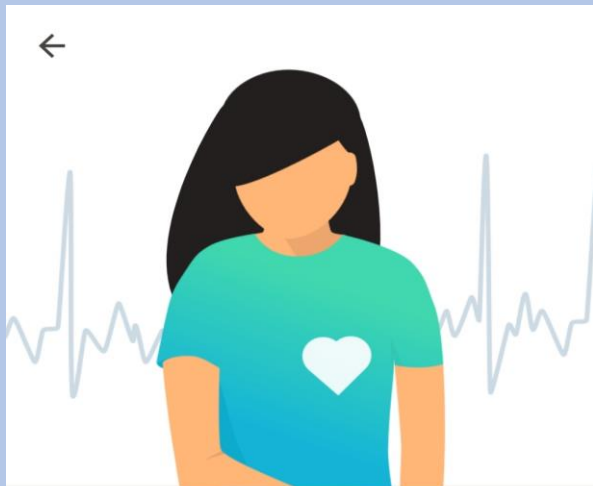Selecteer **Volgende**




AFib kan gevaarlijk zijn als het niet wordt behandeld

Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het hart te snel en onregelmatig samentrekt. Het kan leiden tot ernstige complicaties als het niet wordt behandeld.

Volgende

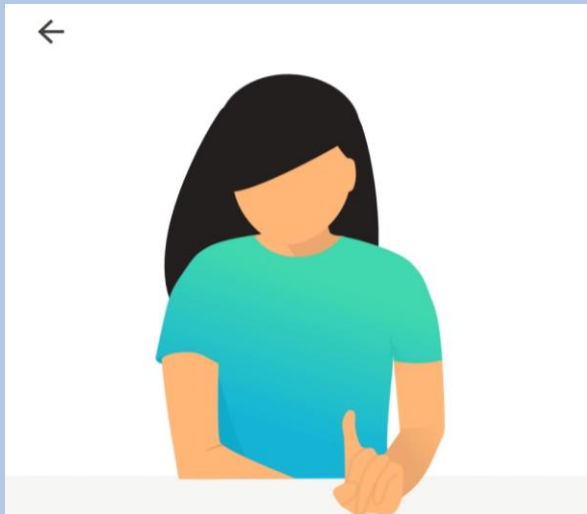Selecteer **Volgende**




ScanWatch kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of denk u dat u een hartaanval hebt? Bel dan uw arts of de hulpdiensten.

Volgende

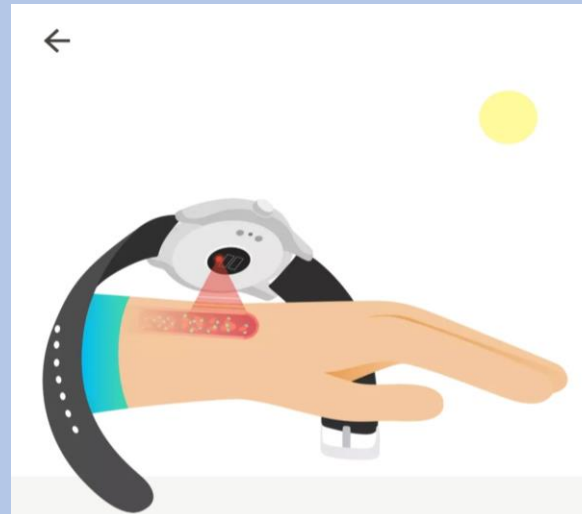Selecteer **Volgende**




Laat u elke 10 minuten automatisch controleren

Zodra de functie is geactiveerd, wordt elke 10 minuten een onregelmatige hartslagscan gestart zonder enige input van uw kant.

Volgende

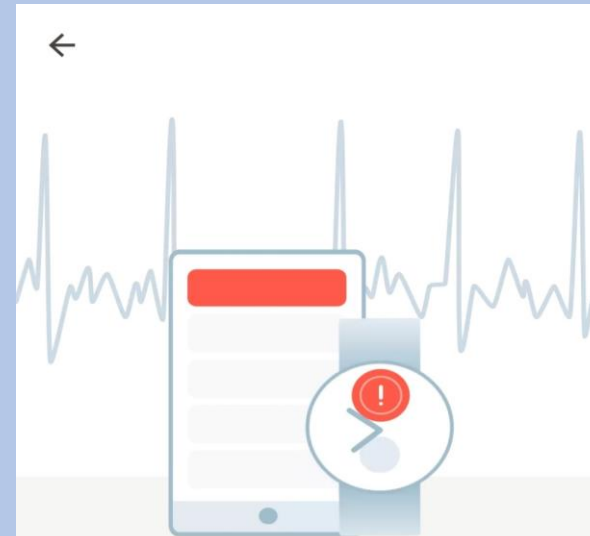Selecteer **Activeer nu** mocht u dit willen




Ontvang waarschuwingen wanneer episodes plaatsvinden

Zodra er een onregelmatig hartritme wordt gedetecteerd dat wijst op atriumfibrilleren, ontvangt u een melding op uw apparaat en op uw telefoon.

Activeer nu

Niet nu

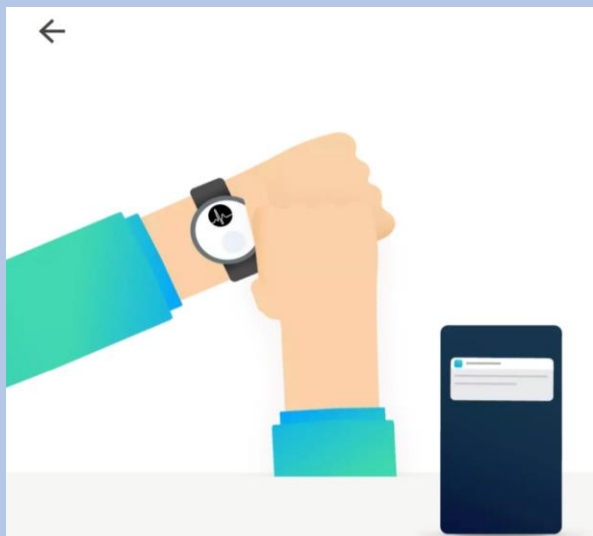Selecteer **Begrepen**



Neem een ECG door op de kroon te drukken wanneer u een waarschuwing ontvangt

Een ECG-opname is de enige manier waarop artsen een waarschuwing kunnen bevestigen.

Begrepen

Meer informatie

Selecteer **Accepteren en activeren**



Raadpleeg deze gebruiksinstructies.

Tik voor meer informatie



Accepteren en activeren

Selecteer **het aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Meldingen voor rustfrequentie hoge en lage hartslag configureren

NOG NIET GEZIEN



Scans ademhalingsstoornissen configureren

NOG NIET GEZIEN



Meer informatie over trainingen en GPS

NOG NIET GEZIEN

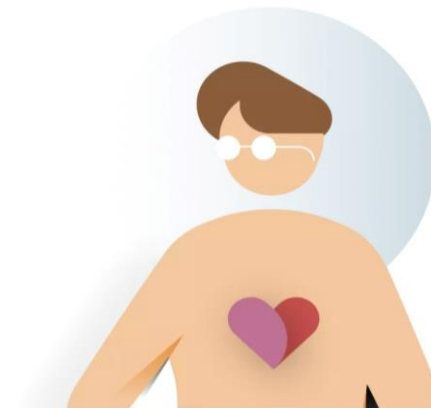


Activiteitendoelen instellen

NOG NIET GEZIEN

Later voltooiën

Selecteer **Volgende**



Wat is de hartslag in rust?

De hartslag in rust is uw hartslag terwijl u 10 minuten inactief bent. Een normale hartslag in rust ligt tussen 60 en 100 slagen per minuut, maar dit kan per persoon verschillen.

Volgende

Selecteer **Volgende**

←



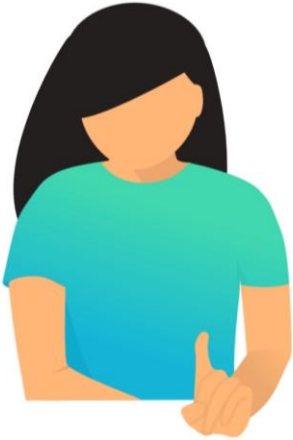
Hoe werken HR-meldingen in rust?

Als uw hartslag in rust te hoog of te laag is, ontvangt u een melding. U kunt de drempelwaarden voor hoge en lage hartslag wijzigen in de instellingen.

Volgende

Selecteer **Activeer herinneringen** mocht u dit willen

←



ScanWatch kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.

Voelt u zich niet lekker of denk u dat u misschien een hartaanval hebt? Bel dan uw arts of de hulpdiensten.

Activeer herinneringen

Niet nu

Selecteer **OK**

←



ScanWatch kan hartaanvallen en andere medische aandoeningen niet detecteren.





Voelt u zich niet lekker of denk u dat u misschien een hartaanval hebt? Bel dan uw arts of de hulpdiensten.

OK

Selecteer **het aangegeven kolom**

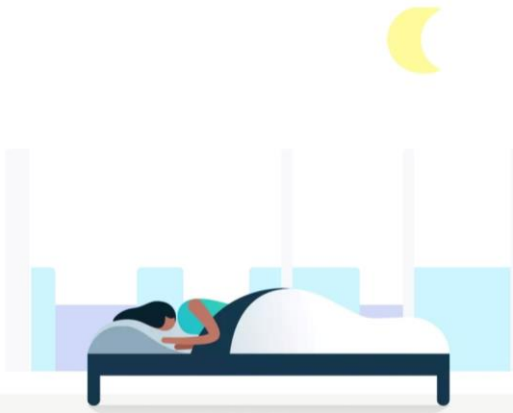
Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken
Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.

-  Scans ademhalingsstoornissen configureren
NOG NIET GEZIEN
-  Meer informatie over trainingen en GPS
NOG NIET GEZIEN
-  Activiteitendoelen instellen
NOG NIET GEZIEN
-  Navigeren in ScanWatch
TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN

Later voltooien

Selecteer **Starten**




ScanWatch houdt uw slaap automatisch bij wanneer u het horloge in bed draagt

ScanWatch houdt uw slaapcyclus en slaaphartslag bij. U hoeft het horloge alleen te dragen, verder niets. U krijgt een overzicht van uw slaap wanneer u wakker wordt.

Starten

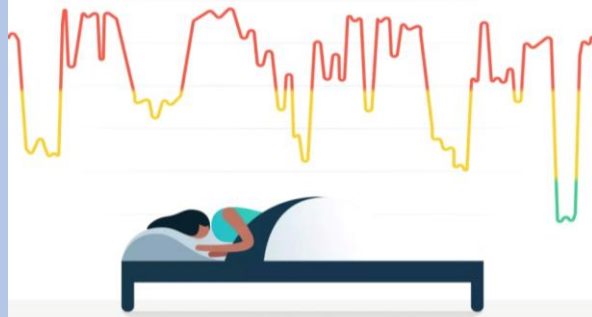Selecteer **Volgende**




Verbeter slaaptracking met ademhalingscans

Als de functie Ademhalingsscan is ingeschakeld, kan ScanWatch ademhalingsstoornissen detecteren, naast de standaardslaaptracking.

Volgende

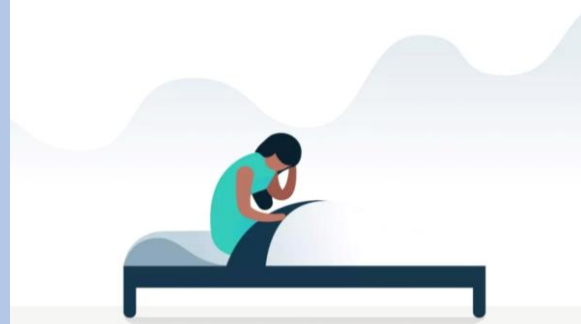Selecteer **Volgende**



Het opsporen van ademhalingsstoornissen kan uw algehele welzijn verbeteren

Ademhalingsstoornissen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van uw slaap en dus op uw algehele welzijn.

Volgende

Selecteer **Frequentie instellen**



Ademhalingscans plannen

Om de levensduur van de batterij te sparen en omdat ademhalingsstoornissen zich niet snel ontwikkelen, raden we aan de frequentie in te stellen op "Automatisch".

Frequentie instellen

Selecteer **Een optie en bevestig**



Ademhalingsscan

Hierdoor wordt de led van het horloge continu ingeschakeld om nauwkeuriger gegevens vast te leggen en het algoritme in staat te stellen om betere inzichten van uw nacht te genereren. Dit zal de levensduur van de batterij drastisch beïnvloeden.



Uit

Ademhalingsstoornissen worden niet gedetecteerd.



Automatisch (aanbevolen)

ScanWatch start automatisch een Ademhalingsscan op het beste moment, een paar keer per kwartier.

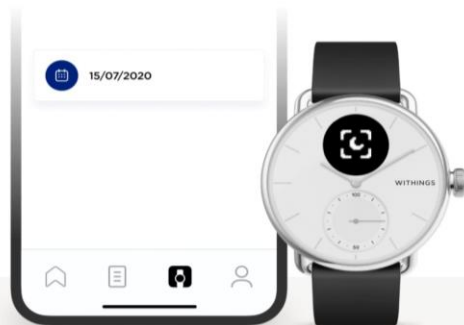


Altijd aan

U krijgt elke ochtend de resultaten. Maar let op, dit verkort de levensduur van de batterij.

Bevestigen

Selecteer **Volgende**




Krijg een herinnering voor een Ademhalingsscan

Houd dit symbool in de gaten op uw ScanWatch: het geeft aan dat er een Ademhalingsscan is gepland. U kunt ook naar de instellingen van de functie gaan om precies te weten wanneer de volgende gepland is.

Volgende

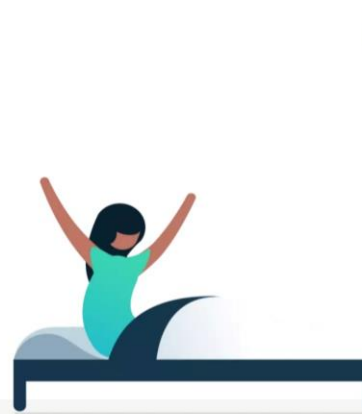Selecteer **Begrepen**




Klaar! Draag de ScanWatch als u gaat slapen om gegevens te krijgen over ademhalingsstoornissen wanneer u wakker wordt.

Alles wordt automatisch getraceerd en gesynchroniseerd met Withings zodra u opstaat.

Begrepen

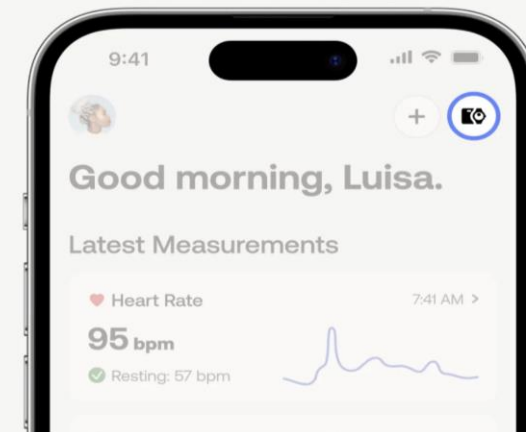Selecteer **Ok, begrepen**



U kunt de ademhalingsscan later activeren op het tabblad Apparaten.

Ga naar het tabblad Apparaten van uw app, zoek uw apparaat op, ga naar "Alle instellingen" en activeer wat u nodig hebt.

Ok, begrepen

Selecteer **het aangegeven kolom**

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



Meer informatie over trainingen en GPS

NOG NIET GEZIEN



Activiteitendoelen instellen

NOG NIET GEZIEN



Navigeren in ScanWatch

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Meldingen activeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN

Later voltooien

Selecteer **Volgende**



Ga naar het trainingsmenu en druk op de kroon voor toegang

Het analoge subdialoogvenster op uw horloge houdt automatisch uw dagelijkse activiteitsvoortgang bij.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Druk kort om uw training te selecteren en de sessie te starten

Blader door het trainingsmenu. Selecteer uw training met een korte druk op de knop om onmiddellijk te beginnen met het bijhouden van uw training.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Druk lang op de kroon om de training te pauzeren of te beëindigen.

Als u lang op de kroon drukt, pauzeert u de training. Draai vanaf hier om de training te stoppen en druk lang om te bevestigen.

Volgende

Selecteer **Volgende**



Houd uw sessies bij en volg uw voortgang

Tijdens een training controleert ScanWatch voortdurend de hartslag, duur, verbrande calorieën, aantal stappen en het kan zelfs uw route in kaart brengen.

Volgende

Selecteer **Activeer herinneringen**



Gebruik uw telefoon om meer uit uw sessie te halen

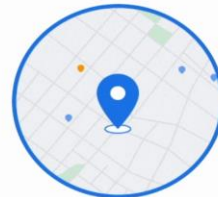
Geef Withings toegang tot uw positie om real-time GPS-gegevens op te halen en meer statistieken vast te leggen, waaronder route, afstand en tempo.

Activeer herinneringen


Selecteer **Geschat en Tijdens gebruik van de app**



Withings toegang geven tot de locatie van dit apparaat?



Exact

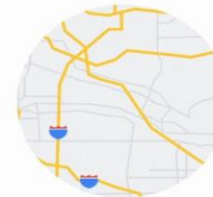

Geschat

Tijdens gebruik van de app

Alleen deze keer

Niet toestaan

Selecteer **wat uw voorkeur heeft**



Geef Withings toegang tot de locatie van dit apparaat, zelfs als de app is afgesloten.

Withings App verzamelt locatiegegevens om via Bluetooth te zoeken naar/verbinding te maken met Withings-producten en om een trainingsroute vast te leggen als dit is ingeschakeld, zelfs als de app afgesloten is of niet wordt gebruikt.

Ga naar instellingen

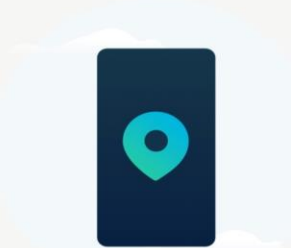
Later

Selecteer **Ok**, begrepen



Geef Withings toegang tot de locatie van dit apparaat, zelfs als de app is afgesloten.

Withings App verzamelt locatiegegevens om via Bluetooth te zoeken naar/verbinding te maken met Withings-producten en om een trainingsroute vast te leggen als dit is ingeschakeld, zelfs als de app afgesloten is of niet wordt gebruikt.



Ga naar instellingen

Ok, begrepen

Selecteer **Ok**, begrepen



U kunt geen GPS-tracking gebruiken

Als u van gedachten bent veranderd, ga dan naar 'Instellingen > Withings App' en zet delen met Bluetooth aan.



Ga naar instellingen

Ok, begrepen

Selecteer **Ok**



Klaar! U kunt nu trainen.

We hopen dat alles eenvoudig en duidelijk was. U kunt deze uitleg overigens altijd opnieuw raadplegen in het onderdeel Apparaten van de Withings-app.

OK

Selecteer aantal stappen die u wenst te behalen dagelijks en **bevestig**

← Hoeveel traint u?

We gebruiken deze info om nauwkeurige gegevens van uw apparaat te krijgen.



Regelmaat van de traini... **Beginner** >

Ons vertellen hoe vaak je traint helpt ons gepersonaliseerde inzichten te sturen

Dagelijkse stappendoel **10.000** >

Hoeveel stappen per dag wilt u halen?

Bevestigen

Selecteer **Ok**

Laten we ScanWatch instellen

Kenmerken

Lees wat het product te bieden heeft en activeer alles.



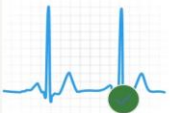
Navigeren in ScanWatch

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Meldingen activeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Uw eerste elektrocardiogram uitvoeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN



Uw eerste zuurstofsaturatiemeting uitvoeren

TIK OM OPNIEUW TE BEKIJKEN

OK

Scanwatch informatie

- De Scanwatch is spatwater dicht en er kan mee gedoucht worden. Zwemmen wordt niet geadviseerd.
- Maak altijd een ECG met het horloge om de pols welke u aangegeven heeft bij installatie.
- Het horloge kan uw slaapregistratie bijhouden als u deze 's nachts omhoudt. Dit hoeft overigens niet, deze gegevens worden niet nagekeken.
- De Scanwatch werkt op een accu en moet regelmatig opgeladen worden. De oplader vindt u in de verpakking.

Het maken van een ECG.

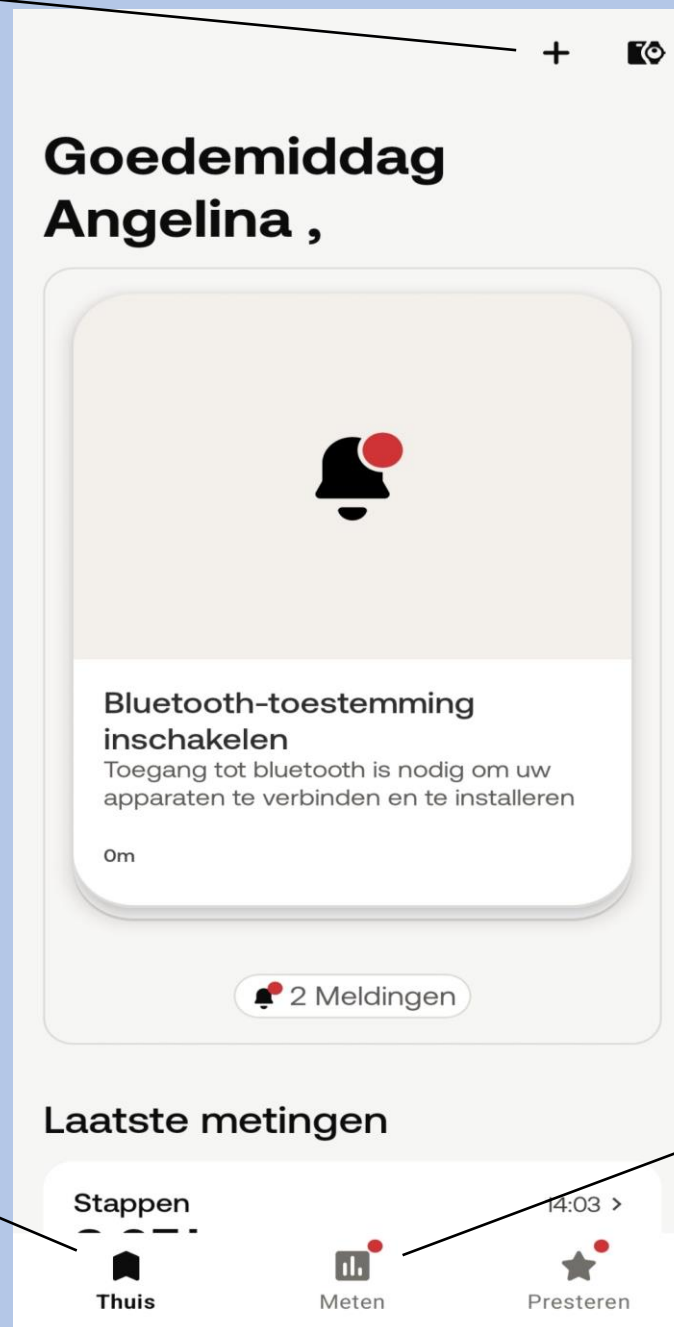
- Doe uw horloge op de juiste pols.
- Open de Withings app als u een ECG gaat maken.
- Druk eenmaal de knop aan de zijkant in.
- Draai aan het kroontje tot u Ecg ziet verschijnen in het kleine schermje van het horloge.
- Druk eenmaal goed de knop in als u Ecg ziet op het horloge.
- Leg uw gehele hand over het horloge.
- Op uw telefoon verschijnt een aftel scherm houdt u hand op het horloge tot die tweemaal trilt en u op de app 0 ziet.
- In de app verschijnt de uitslag en mag u op OK tikken.



App lay-out

Handmatig
invoeren metingen

Lijst van
apparaten



Meest recente
metingen

Alle gemaakte
metingen



Patientgegevens

Patientnr
Naam
Telefoon

Account

Bloeddrukmeter



Serienr 0024E495B340
Te gebruiken 1 keer per dag
gedurende 2 weken

Uw streefwaarden:

	Bovendruk / Onderdruk
Ondergrens	90 / 60 mm Hg
Streefwaarde	120 / 80 mm Hg
Bovengrens	145 / 90 mm Hg

▶ Meet uw bloeddruk in rust, circa 1 uur na het innemen van uw medicatie, op een vast tijdstip van de dag onder dezelfde omstandigheden.

Weegschaal



Serienr 0103700546704956210024E
Te gebruiken 1 keer per dag
gedurende 2 weken

Huidig gewicht kg
Streef gewicht kg

▶ Meet uw gewicht op een vast tijdstip van de dag onder dezelfde omstandigheden.

Move ECG



Serienr 3700546705991
Te gebruiken 1 keer per dag
gedurende 2 weken

Streefwaarde 5000 stappen per dag

Uw persoonlijke accountgegevens

Inlognaam

Wachtwoord

Gebruik deze gegevens om in te loggen of accounts aan te maken in de benodigde applicaties.

Scan de QR-Code om de website te openen van TheBox thuismeetapparatuur. Daar kunt u alle informatie vinden omtrent The Box zoals installatie, instructiefilmpje en meest gestelde vragen.



VOOR TECHNISCHE SUPPORT KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

- ☐ Telefonisch tussen 9:00 en 12:00 op 07604 (maandag tot en met vrijdag)
- ☐ Per e-mail: boxsupport@lumc.nl

Hoe vaak een meting?

U heeft van het LUMC een fomulier meegekregen zoals hiernaast staat afgebeeld.

Op dat formulier staat per apparaat hoe vaak u een meting moet doen per week. Heeft u hier vragen over bespreek dit dan met uw behandelend specialist op uw eerst volgende afspraak.

Let op! Per persoon verschilt het welke apparatuur u heeft en welke meetfrequentie van kracht is.

Let op!

“The BOX” is een extra dienst binnen uw zorgtraject van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De thuismeetapparatuur is bedoeld om uzelf te monitoren.

Deze apparatuur is geen vervanging voor medisch advies of de diagnose van een arts. Als patiënt blijft u zelf verantwoordelijk voor het vragen van extra hulp wanneer dat nodig lijkt.

Heeft u spoedeisende klachten, bel dan 112.

Heeft u gezondheidsklachten die niet tot het volgende contactmoment kunnen wachten en maakt u zich zorgen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de hartpoli via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714.

Buiten kantooruren adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Heeft u een vraag over de thuismeetapparatuur en het koppelen van de apparaten, neem dan contact op met het team van The Box. Let op dit is alleen voor technische vragen. De afdeling boxsupport kan niet helpen bij medische vragen. Email: boxsupport@lumc.nl. Vermeld altijd uw naam en geboortedatum in uw email.

Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 tot en met 12:00 uur op 071-5297604.

Op de website www.hartlongcentrum.nl/thebox staat alle informatie omtrent The Box. Hier vindt u bijvoorbeeld het stappenplan voor het installeren van uw box.



Einde installatie en uitleg the box

Dank u wel voor uw aandacht en mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

- Tel : 071-5297604 (9:00 – 12:00)
E-mail: boxsupport@lumc.nl

Vriendelijke groet,
Team Box Support

